


Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography and Laparoscopy

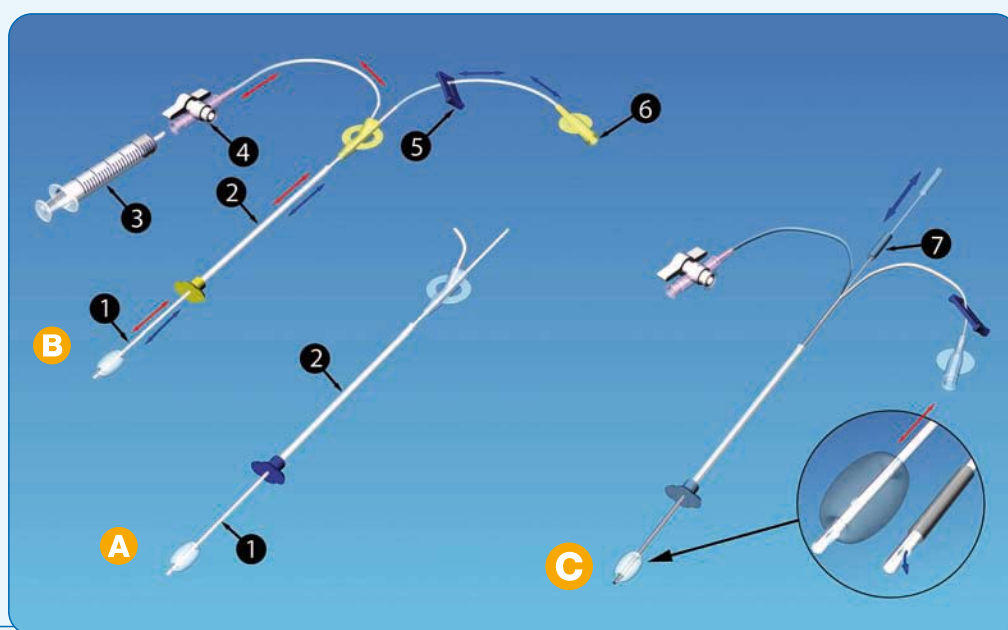

A

SOFTINJECTOR

B

RIGIDINJECTOR

C

INJECTOR PLUS

Iniettori uterini per isterosalpingografia

Hysterosalpingography uterine injectors

- Per l'iniezione di mezzi di contrasto (radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di isterosalpingografia. Sono costituiti da:
 - un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
 - un catetere radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 cc sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
 - rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
 - clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5)
 - un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
 - una siringa da 2,5 cc. (3).

Disponibile in 3 versioni: **SOFTINJECTOR (A)** con catetere radiopaco morbido, **RIGIDINJECTOR (B)** con catetere radiopaco rigido e **INJECTOR PLUS (C)** con catetere radiopaco semirigido provvisto di mandrino (7) che ne consente una pre-formatura prima dell'inserimento. La distanza del palloncino dall'estremità distale e la rigidità del catetere possono essere personalizzate a richiesta per un quantitativo minimo di 200 pezzi.

- To inject contrast media (radio-opaque / methylene blue) in hysterosalpingography diagnostic procedure. The catheters are composed by:

- a rigid introducer provided with a mobile positioner (2);
- a double lumen radiopaque catheter (1) with a thermoplastic rubber oval balloon of 2.5 cc on the distal tip, that ensures a firm positioning of the catheter;
- stopcock (4) to regulate balloon inflation;
- tubing clamp to avoid the liquid backflow (5)
- a female luer-lock connector (6) for contrast media injection;
- a 2.5 cc syringe (3).

Available in 3 versions: **SOFTINJECTOR (A)** with radiopaque soft catheter, **RIGIDINJECTOR (B)** with radiopaque rigid catheter and **INJECTOR PLUS (C)** with radiopaque semirigid catheter provided with a stylet (7) that allows manual shaping before insertion. Balloon distance from distal tip and catheter stiffness can be customized upon request for 200 pcs minimum order.

Cod. A	Cod. B	Cod. C	Descrizione - Description
720240	720239		Ø esterno 1,67 mm. - O.D. 1,67 mm. (5 Fr)
720226	720225	730226	Ø esterno 2,0 mm. - O.D. 2,0 mm. (6 Fr)
720250	720251		Ø esterno 2,33 mm. - O.D. 2,33 mm. (7 Fr)

Scatola da 10 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

10 pcs. per box. Products are single packed, single use, EtO sterilized and CE marked.