



RI.MOS. | MED

carevix®

Stabilizzatore Cervicale ad Aspirazione

**Clinicamente testato per ridurre
il dolore e il sanguinamento
nelle procedure transcervicali**

Delicato • Intuitivo • Versatile



 **aspivix**

Un approccio innovativo alla stabilizzazione della cervice

carevix® è uno stabilizzatore cervicale monouso ad aspirazione, progettato con tecnologia a vuoto, interamente concepito come alternativa moderna al tenacolo senza comprometterne le prestazioni.



Delicato

Riduce significativamente il dolore e il sanguinamento durante la manipolazione della cervice, garantendo al contempo una trazione e una manovrabilità affidabili. ²



Intuitivo

Progettato per essere facile da usare e per rispecchiare la pratica clinica attuale. ²



Versatile

Progettato per essere utilizzato in varie procedure transcervicali, ad esempio inserimento e rimozione IUD, isteroscopia, fecondazione in vitro e altro ancora. ²

Fino al
-73%

Riduzione del dolore
con carevix®

-83%

Riduzione del sanguinamento
con carevix®

Fino al
-88%

Riduzione dei pazienti che
soffrono di dolore intenso
grazie a carevix®




Garantiamo che il ciclo di vita del nostro prodotto **carevix®**, dalla produzione allo smaltimento, sia a emissioni zero per un pianeta più sano.




Prove Cliniche

I dati di studi clinici randomizzati controllati mostrano una significativa riduzione del dolore e dei tassi di sanguinamento associati alla procedura di inserimento dello IUD con carevix®. Le donne nullipare hanno tratto i maggiori benefici dal dispositivo carevix®.²

Riduzione del dolore - Tutte le donne

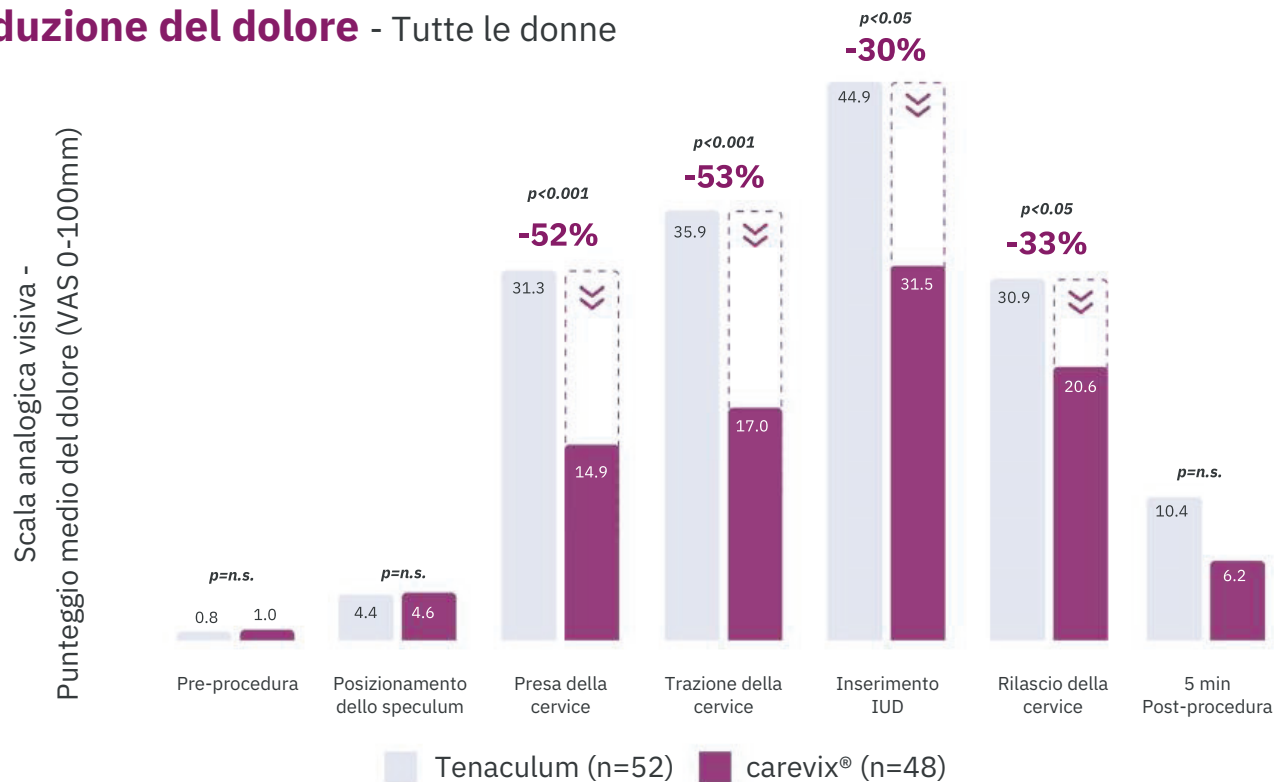


Riduzione del dolore - Donne nullipare

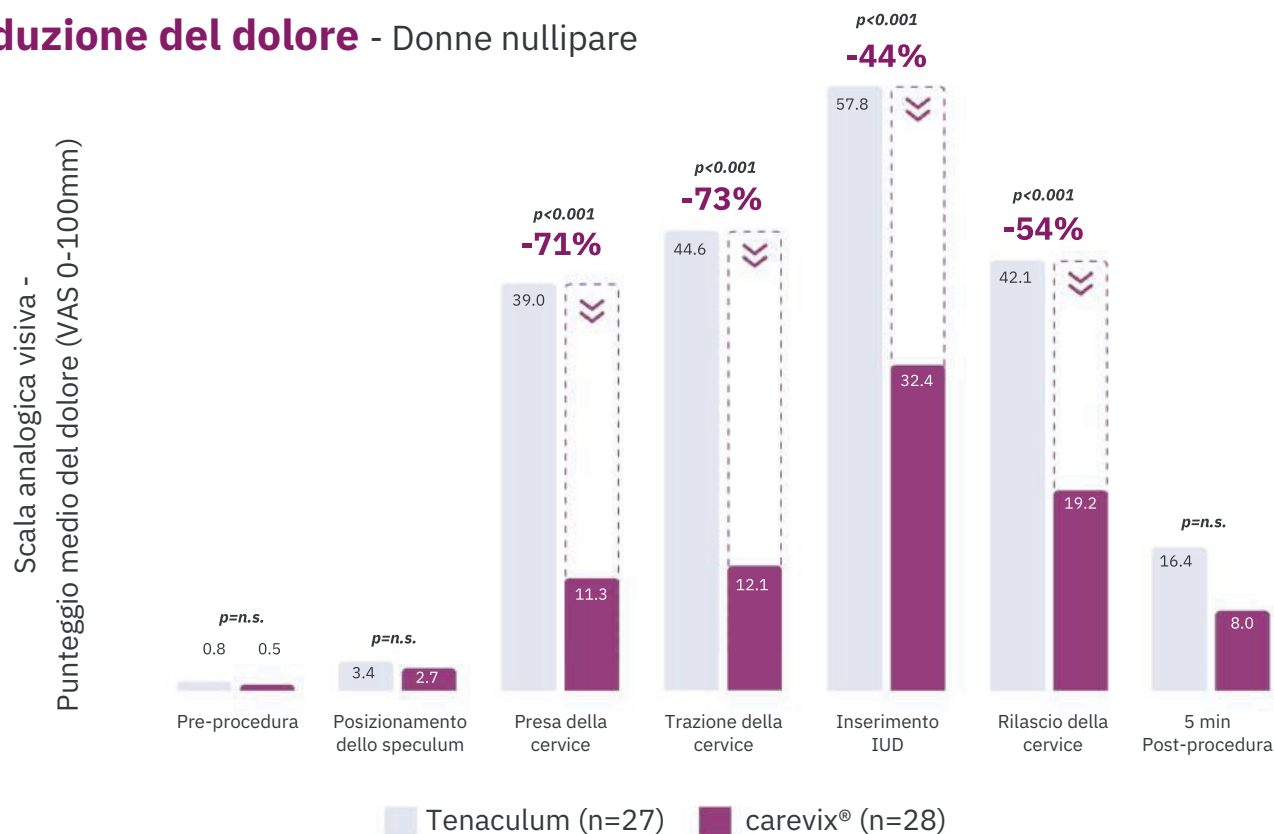

Durante lo studio clinico, sono state coinvolte 100 pazienti per misurare il dolore provato durante le procedure con IUD.

Risultati relativi al sanguinamento - Tutte le donne

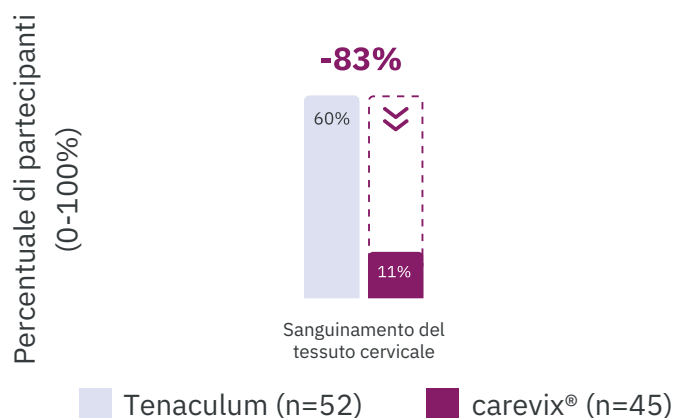

La frequenza del sanguinamento del tessuto cervicale è significativamente ridotta (83% in meno con carevix®).

Secondo un sondaggio condotto da ASPIVIX su 247 medici negli Stati Uniti, questi ultimi impiegano in media 4 minuti per arrestare l'emorragia durante l'inserimento dello IUD. Utilizzando carevix®, è possibile risparmiare questo tempo e dedicarlo alla cura delle pazienti.

"carevix® è un'alternativa promettente con il potenziale di migliorare notevolmente l'esperienza di inserimento dello IUD per le donne di tutto il mondo".


Dr. Michal Yaron, ricercatore, Ospedale universitario di Ginevra, Svizzera

"Questi progressi hanno un potenziale promettente nel rivoluzionare il processo di inserimento dello IUD per le donne, rendendolo un'opzione contraccettiva più attraente".

Arian Veyssi & Haidyn Ogg, ricercatori dell'Università del Texas ad Austin, Stati Uniti

Come funziona **carevix**®

Componenti

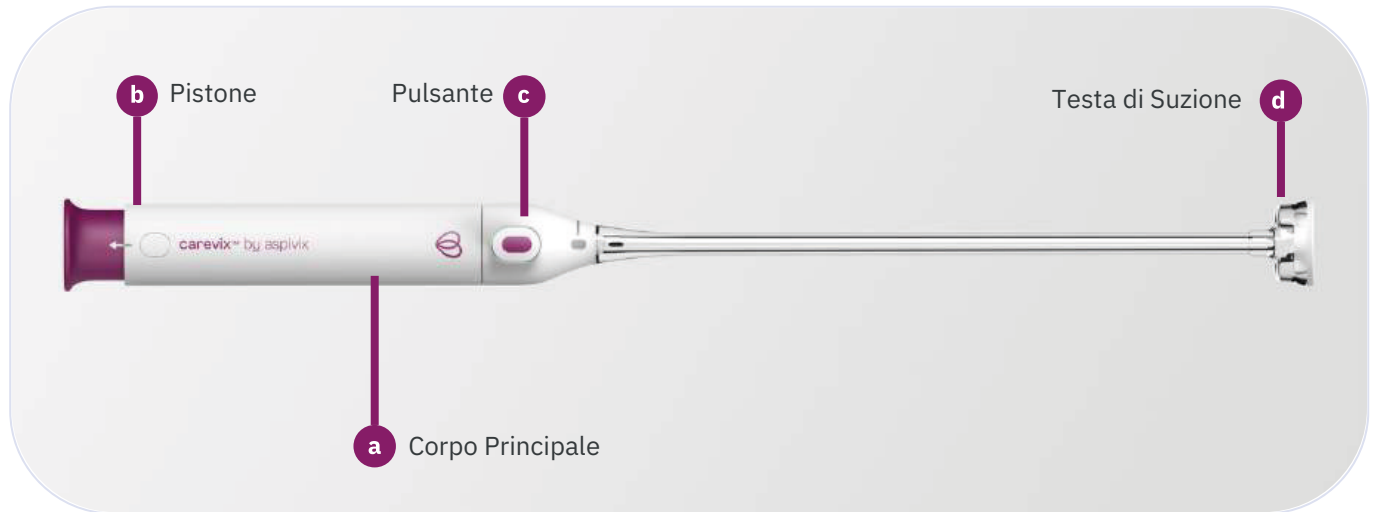


Assemblaggio



Collegare la Testa di Suzione al Corpo Principale.




Allineare le tacche spesse di collegamento presenti sulla Testa di Suzione e sul Corpo Principale.

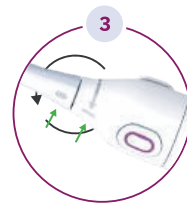


Ruotare in senso orario solo il Corpo Principale, fino a quando questo non si blocca e la tacca sottile sul Corpo Principale non è allineata alla tacca spessa sulla Testa di Suzione.

Utilizzo di **carevix**® - 3 Semplici Passaggi

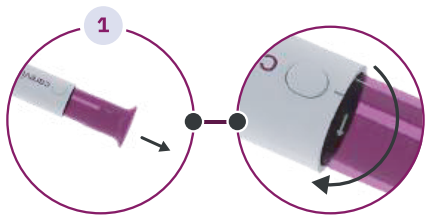

Tirare il Pistone dal Corpo Principale fino all'arresto per generare il vuoto e ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo.

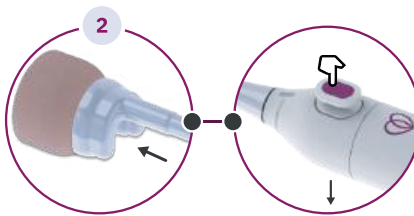

Posizionare la Testa di Suzione sulla cervice e premere il Pulsante verso il basso per generare il vuoto.



Premere il Pulsante verso l'alto per rilasciare il vuoto.

Riferimenti

1. Michal Yaron, Hélène Legardeur, Bastien Barcellini, Farida Akhoundova, Patrice Mathevet, Safety and efficacy of a suction cervical stabilizer for intrauterine contraceptive device insertion: Results from a randomized, controlled study, Contraception, Volume 123, 2023, 110004, ISSN 0010-7824, <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2023.110004>.

2. Vedi IFU: <https://eifu.aspivix.com/carevix>

3. Veyssi, A. Ogg, H. Initiating a paradigm shift in American healthcare: Empowering women with implantable contraceptives. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2023; Volume 89 105075 (8); doi:10.1016/j.jddst.2023.105075



eifu.aspivix.com

Consultare le istruzioni per l'uso per informazioni dettagliate relative alle modalità d'uso e al funzionamento del dispositivo, alle indicazioni, alle controindicazioni, alle avvertenze, alle precauzioni e ai potenziali eventi avversi.



www.rimos.com

Distributore esclusivo
per l'Italia:



RI.MOS.
Medical Products

via Manuzio, 15
41037 - Mirandola (MO)
Tel. 0535.25755
info@rimos.com

Produttore:

ASPIVIX SA

Sede centrale globale
Route de la Corniche 8
1066 Epalinges Svizzera



C E 0123

 **aspivix**

Copyright ©2024, Aspivix SA. Tutti i diritti riservati. www.aspivix.com