



FERTIRAM[®]

PMA - Procreazione Medicalmente Assistita



Chi siamo

La storia, Tecnologia e Certificazioni, Mercati

2-4

Diagnostica Ginecologica

Softinjector, Rigidinjector, Injector Plus

5-7

Inseminazione Intrauterina (IUI)

Ainsegrey, Ainsewhite, Ainseblue, Ainseblue-T

8-11

Prelievo Ovocitario

Monolume, Monocyte-N, Doublecyte-N

12-14

Crioconservazione

V-STORK

15

Trasferimento Embrioni

Transfer Easy, Transfer Omni-L, Transfer Omni-S

16-18

Politica di vendita

Clientela, Condizioni generali di vendita

19

La Storia

Fondata nel 1988 nel cuore del distretto biomedicale di Mirandola (Modena), **RI.MOS.** è un'azienda dinamica e in costante evoluzione, specializzata nello sviluppo e nella produzione di **dispositivi monouso per ginecologia, fecondazione assistita e micro-iniezione**. L'azienda realizza, inoltre, **dispositivi medici e cosmetici per uso umano**, insieme a **prodotti veterinari**, tutti formulati con ingredienti di origine vegetale.

L'attitudine all'innovazione ha radici profonde: già nel 1985, i fondatori avevano dato vita a RAM, tra le prime realtà al mondo a realizzare multi-iniettori monouso per mesoterapia. Un segnale che ha tracciato fin da subito la rotta verso una cultura aziendale orientata all'innovazione e alla lettura proattiva del mercato.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, RI.MOS. punta a ridefinire gli standard del biomedicale attraverso soluzioni all'avanguardia, integrate da tecnologie sostenibili e da un approccio ispirato alla fitoterapia. Le nostre linee a base vegetale rappresentano un'evoluzione significativa nel trattamento delle lesioni cutanee, sfruttando il potenziale terapeutico di piante come Neem e Iperico, con applicazioni in ambito umano e veterinario.

Per rispondere alle esigenze di un mercato globale e specialistico, RI.MOS. opera attraverso tre divisioni strategiche:

- **RI.MOS. MED** – soluzioni avanzate per ginecologia, ostetricia, fecondazione assistita e micro-iniezione;
- **RI.MOS. CARE** – dispositivi medici e cosmetici di origine vegetale per il wound care;
- **RI.MOS. VET** – prodotti veterinari a base vegetale.

Ogni giorno RI.MOS. rafforza la propria presenza globale esportando qualità, ricerca e passione in oltre 80 Paesi, con l'obiettivo di espandersi ulteriormente. La nostra cultura si fonda su valori condivisi: benessere delle persone, approccio positivo, sostenibilità, integrità e orientamento al domani, valori che ispirano ogni decisione, ogni prodotto e ogni partnership.

L'innovazione non è per noi un traguardo, ma una direzione: RI.MOS. cresce investendo in tecnologie, risorse umane e nuovi prodotti, per offrire soluzioni efficaci e sempre più orientate al miglioramento della qualità della vita degli uomini, delle donne e degli animali.



Tecnologia e Certificazioni



Dispositivi Medici

RI.MOS. sviluppa i propri dispositivi medici monouso con la collaborazione di personale medico qualificato e di ricercatori scientifici competenti e aggiornati. Il processo di produzione coinvolge collaboratori e fornitori forti di una grande esperienza nella fabbricazione di prodotti medicali.



Marcatura CE

Grazie all'impiego di moderne tecnologie produttive, i dispositivi RI.MOS. sono marcati CE e sono assemblati da personale qualificato in camere bianche ISO 8, secondo processi conformi a un sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485.



Certificazioni



Laboratory of industrial research
Art. no.14 of Ministerial Decree no.593 of 8/08/2000
G.U. no.87 of 14/04/2007
Ministry of Education,
University and Research

Mercati



Presenza Globale e Prossimità Locale: La Nostra Visione di Mercato

La nostra strategia commerciale è strutturata per garantire copertura e supporto costante, operando con successo sia sul territorio nazionale che su scala globale. Il nostro obiettivo è costruire una partnership duratura che accompagni il professionista in ogni fase della sua attività.

Mercato Nazionale

In Italia, la nostra operatività si fonda su una rete qualificata di rivenditori locali selezionati.

Questa struttura ci permette di offrire:

- Capillarità e competenza tecnica: presenza vicina alle esigenze di cliniche e studi medici, con personale preparato per il settore ginecologico;
- Assistenza immediata: supporto tempestivo per garantire la continuità operativa dei professionisti della salute.

Mercato Internazionale

Distribuiamo i prodotti a marchio GINRAM® e FERTIRAM® in oltre 80 Paesi, con l'export che rappresenta oltre il 55% del fatturato. Collaboriamo con partner e distributori specializzati che condividono i nostri standard di qualità e affidabilità.

In ogni mercato offriamo un ecosistema completo di servizi post-vendita:

- Formazione e aggiornamento: programmi dedicati per l'ottimizzazione dell'uso delle tecnologie nella pratica quotidiana;
- Consulenza specialistica: supporto continuo dalla scelta del prodotto alla sua applicazione;
- Logistica e supporto tecnico: risposte rapide, documentazione completa e gestione efficiente per ridurre i tempi di attesa.

La nostra missione è accompagnare medici e partner commerciali verso risultati costanti, con una collaborazione solida, professionale e proiettata al futuro della ginecologia.




Rapidità e Sicurezza

Diagnostica ginecologica

Softinjector


Iniettore uterino per isterosalpingografia

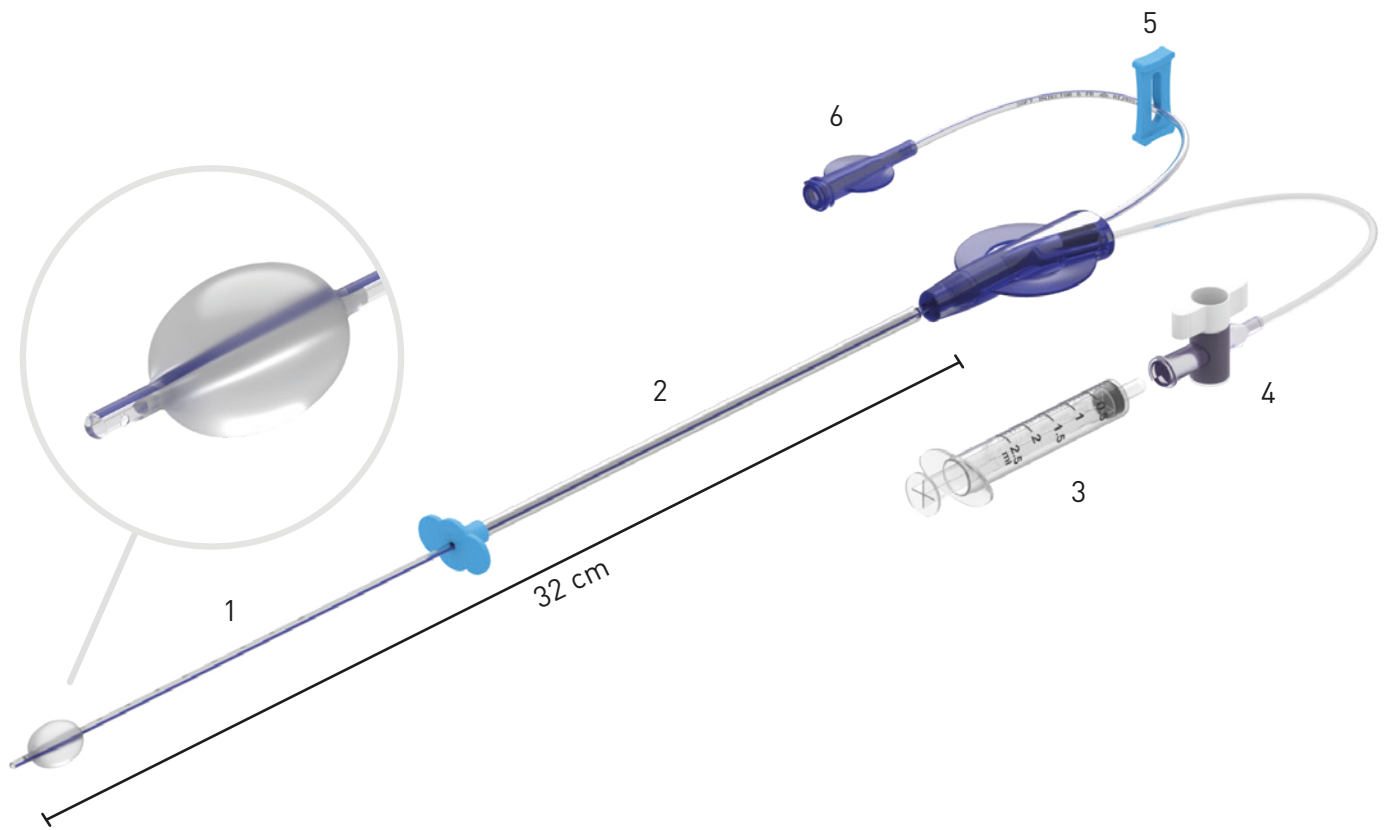

Per l'iniezione di mezzo di contrasto radiopaco nelle procedure di isterosalpingografia.
Sono costituiti da:


- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere morbido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3).

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720240	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)	10 pz.
720226	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	
720250	Ø esterno 2,33 mm (7 Fr)	

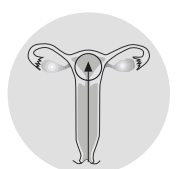

Rigidinjector


Iniettore uterino per isterosalpingografia

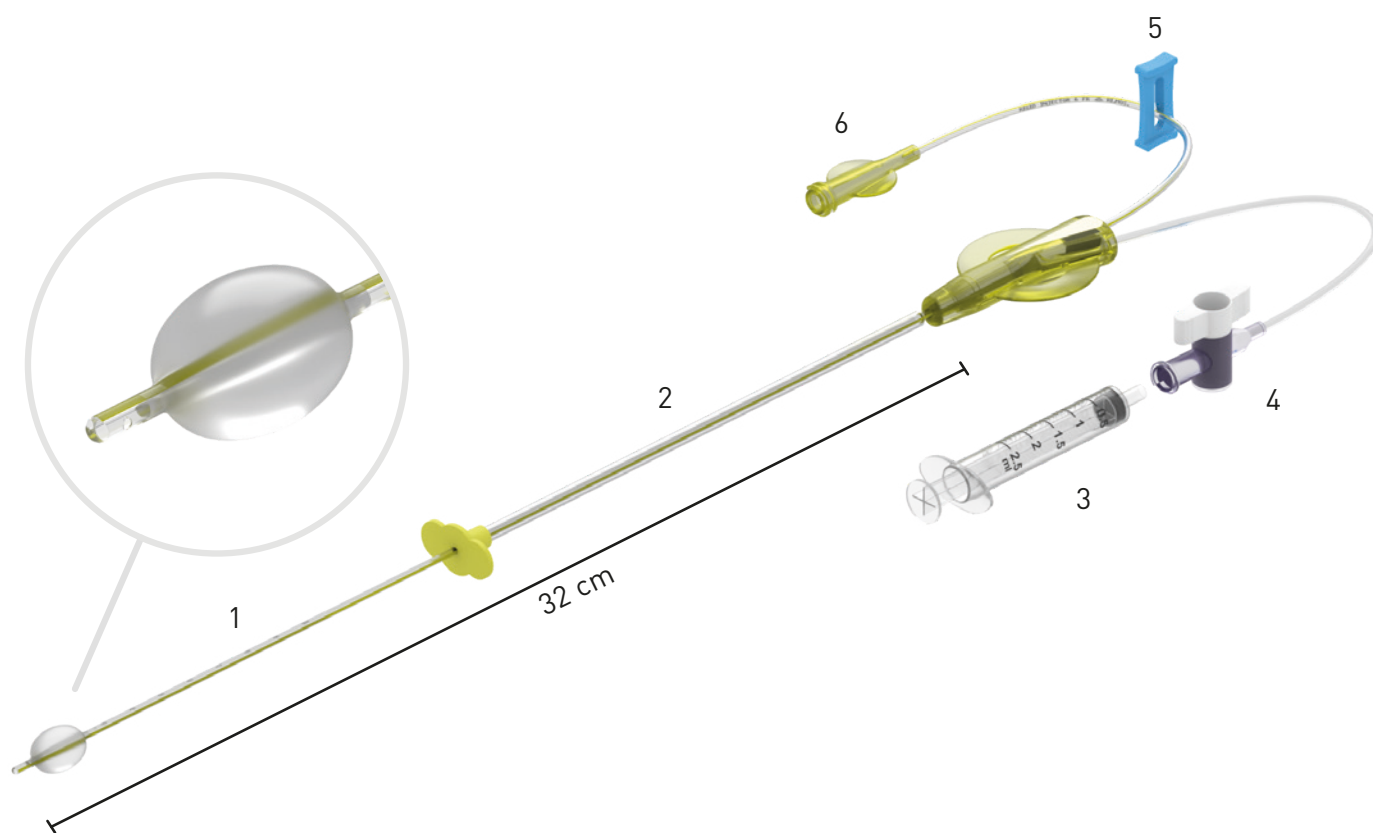

Per l'iniezione di mezzo di contrasto radiopaco nelle procedure di isterosalpingografia.
Sono costituiti da:

- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere rigido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3).


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720239	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)	10 pz.
720225	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	
720251	Ø esterno 2,33 mm (7 Fr)	

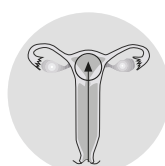

Diagnostica ginecologica

Injector Plus


Iniettore uterino per isterosalpingografia

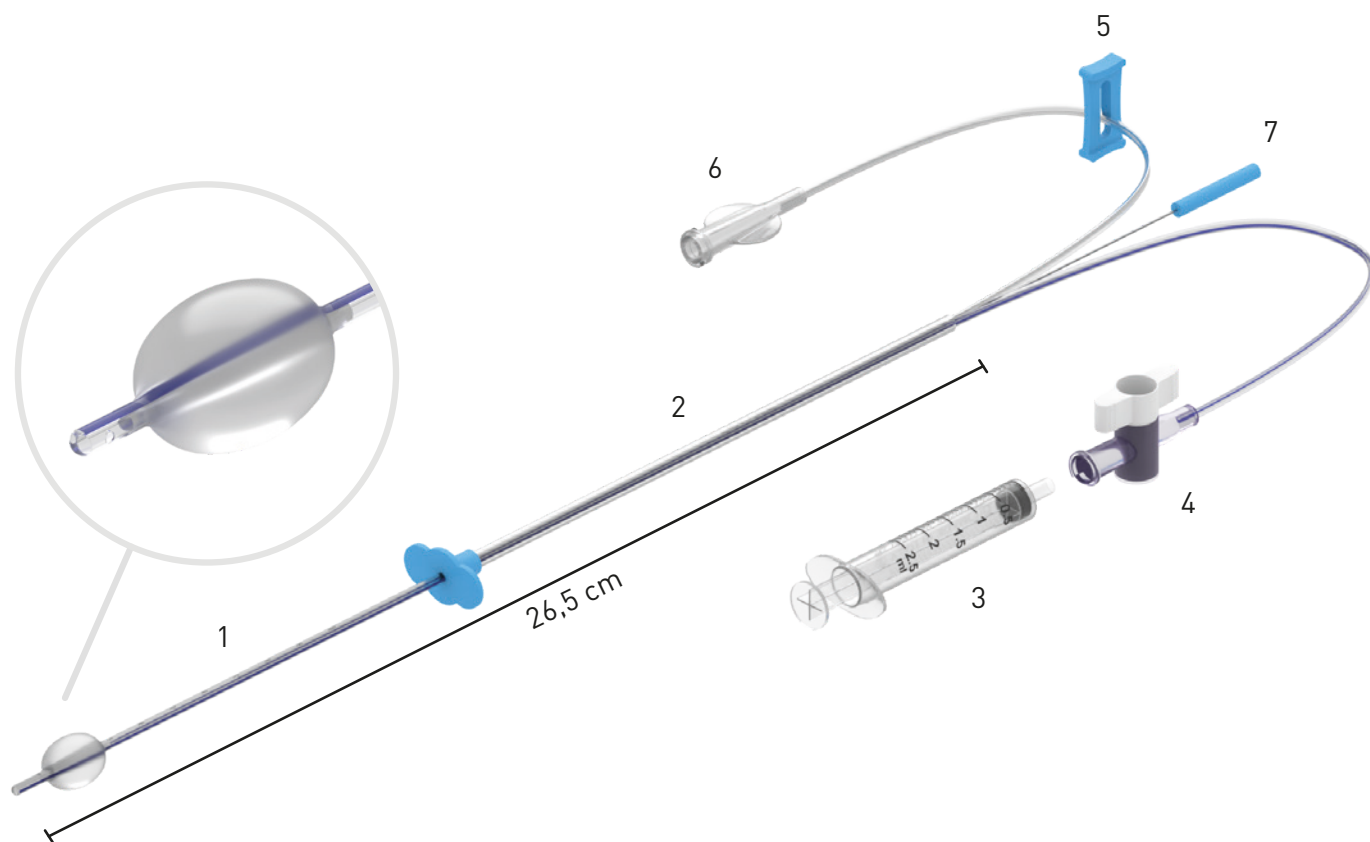

Per l'iniezione di mezzo di contrasto radiopaco nelle procedure di isterosalpingografia. Sono costituiti da:

- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere semirigido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3);
- mandrino (7) per un inserimento agevolato.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
730226	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	10 pz.

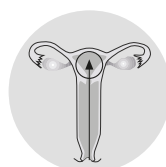

Inseminazione Intrauterina (IUI)

Ainsegrey

Cannula di Inseminazione Intra Uterina

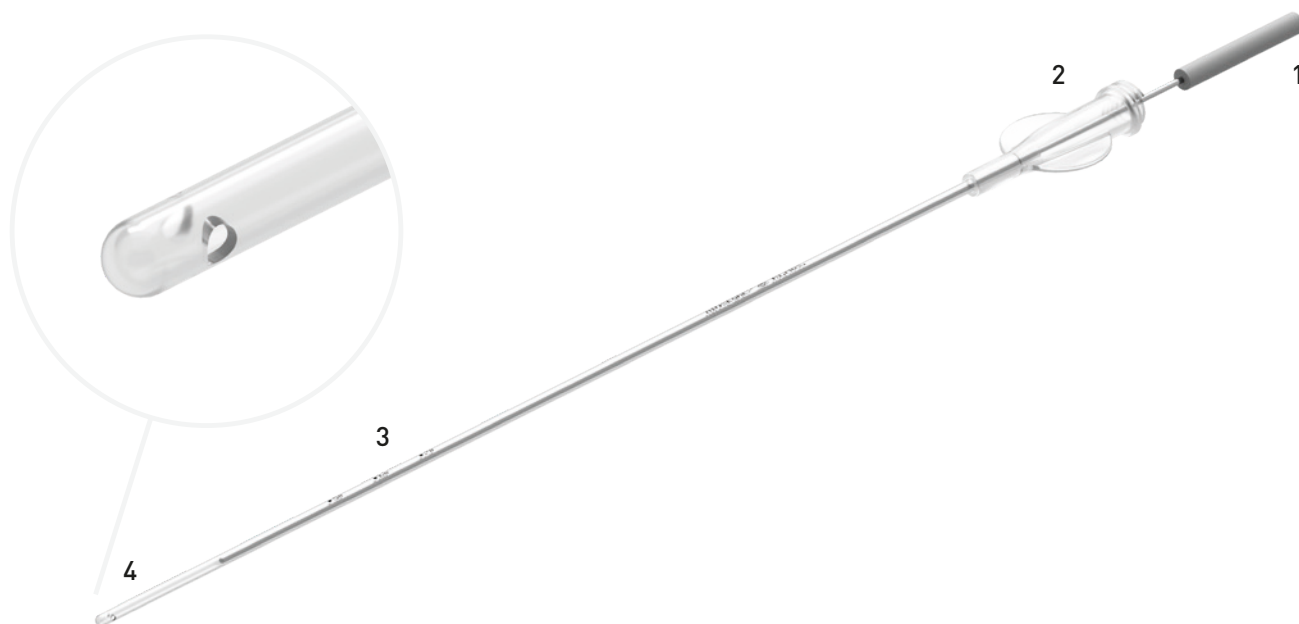


Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di Inseminazione Artificiale. La cannula morbida ha la punta arrotondata (4), due fori laterali ed è provvista di centimetratura* (3). AINSEGNEY è provvisto di mandrino in acciaio (1) per un inserimento facilitato. Il raccordo luer lock funge da impugnatura e permette la connessione sicura alla siringa. Le due alette laterali (2), allineate con i 2 fori sulla punta, indicano l'orientamento durante il posizionamento. Non sono da utilizzare per procedure di trasferimento embrioni.

* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770220	Ø esterno 2 mm Ø interno 1,2 mm Lunghezza 195 mm	24 pz.




Fornito in confezione singola - Monouso - Sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

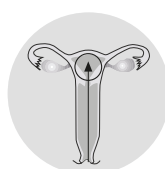

Inseminazione Intrauterina (IUI)

Ainsewhite

Cannula di Inseminazione Intra Uterina

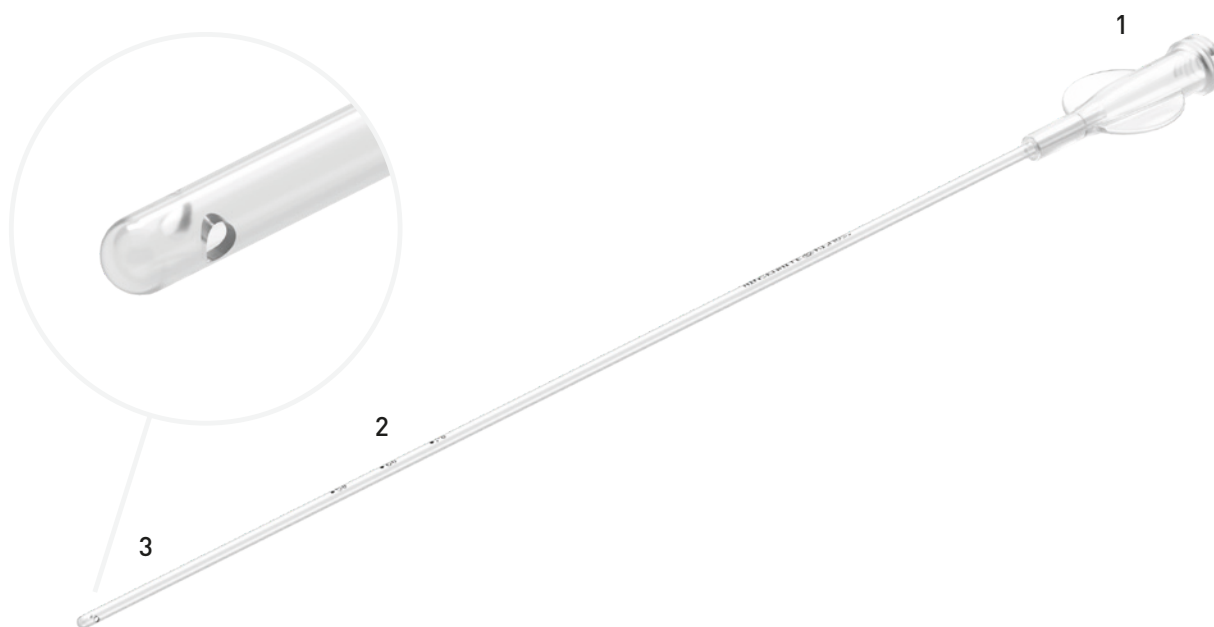

Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di Inseminazione Artificiale. La cannula morbida ha punta arrotondata [3], due fori laterali ed è provvista di centimetratura* [2].


Il raccordo luer lock funge da impugnatura e permette la connessione sicura alla siringa. Le due alette laterali (1), allineate con i 2 fori sulla punta, indicano l'orientamento durante il posizionamento. Non sono da utilizzare per procedure di trasferimento embrioni.

* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770219	Ø esterno 2 mm Ø interno 1,2 mm Lunghezza 195 mm	24 pz.




Fornito in confezione singola - Monouso - Sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

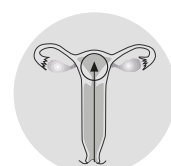

Inseminazione Intrauterina (IUI)

Ainseblue

Cannula di Inseminazione Intra Uterina con estremità distale flessibile

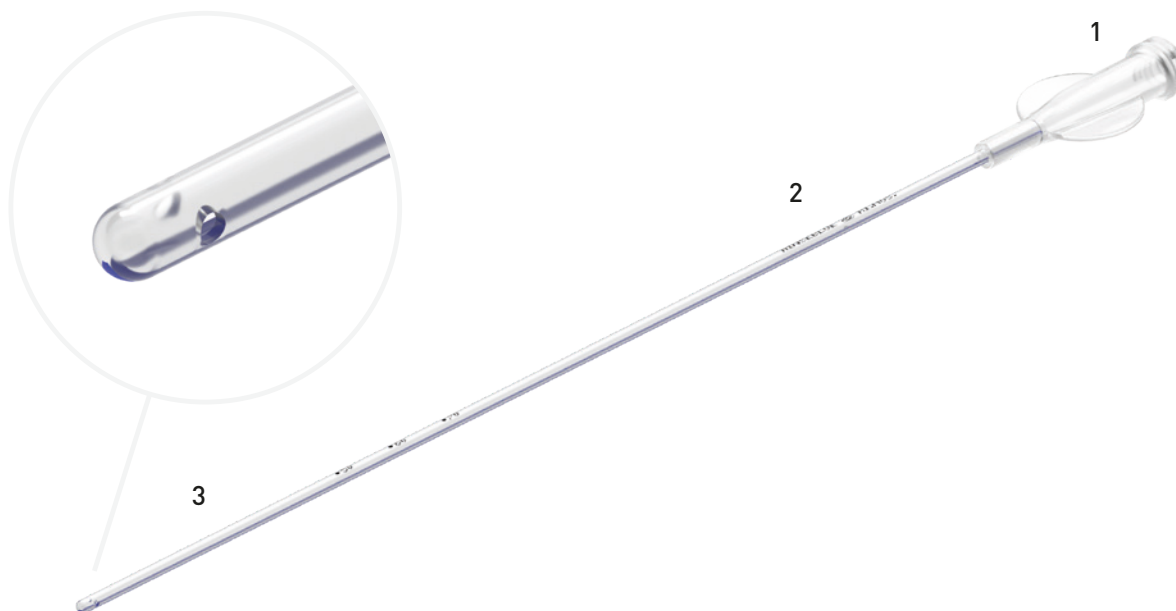

Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di Inseminazione Artificiale. Cannula trasparente ed ecogena con due diversi gradi di flessibilità:

- una porzione prossimale rigida (2) per guidare l'inserimento attraverso la cervice;
- una porzione distale morbida e flessibile (3) per un trasferimento seminale delicato e atraumatico.

Sulla cannula sono presenti tre tacche posizionate da 50 a 70 mm dalla punta e distanziate 10 mm l'una dall'altra*.


I 2 fori laterali in punta permettono una distribuzione ottimale del liquido seminale.

Il raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e permette una connessione sicura con la siringa.

Le due alette laterali, allineate con i 2 fori sulla punta, indicano l'orientamento durante il posizionamento.

* Fornisce una misura approssimativa.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770113	Ø esterno 2 mm Ø interno 1,3 mm Lunghezza 174 mm	24 pz.

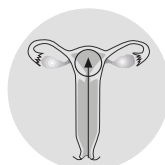

Inseminazione Intrauterina (IUI)

Ainseblue-T

Cannula di Inseminazione Intra Uterina con estremità distale flessibile

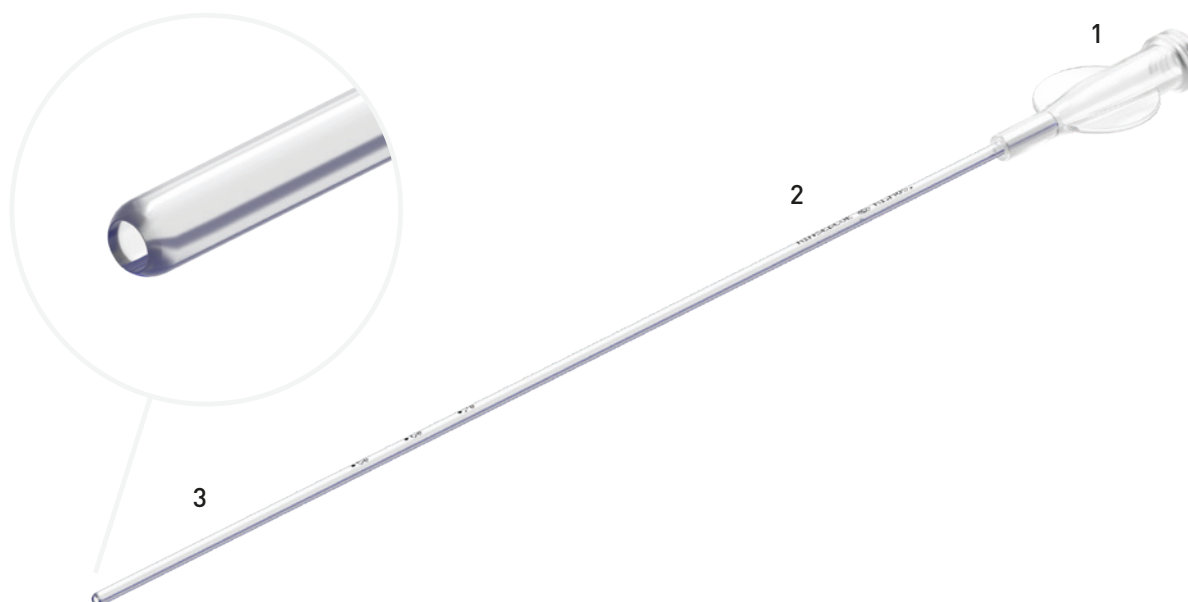

Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di Inseminazione Artificiale. Cannula trasparente ed ecogena con due diversi gradi di flessibilità:

- una porzione prossimale rigida (2) per guidare l'inserimento attraverso la cervice;
- una porzione distale morbida e flessibile (3) per un trasferimento seminale delicato e atraumatico.

Sulla cannula sono presenti tre tacche posizionate da 50 a 70 mm dalla punta e distanziate 10 mm l'una dall'altra*. La punta della cannula è aperta rastremata.


Il raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e permette una connessione sicura con la siringa.

* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770408	Ø esterno 2 mm Ø interno 1,3 mm Lunghezza 174 mm	24 pz.




Fornito in confezione singola - Monouso - Sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

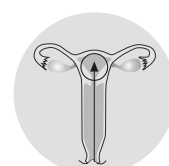

Prelievo Ovocitario Monolume


Ago per prelievo ovociti e aspirazione cisti ovariche

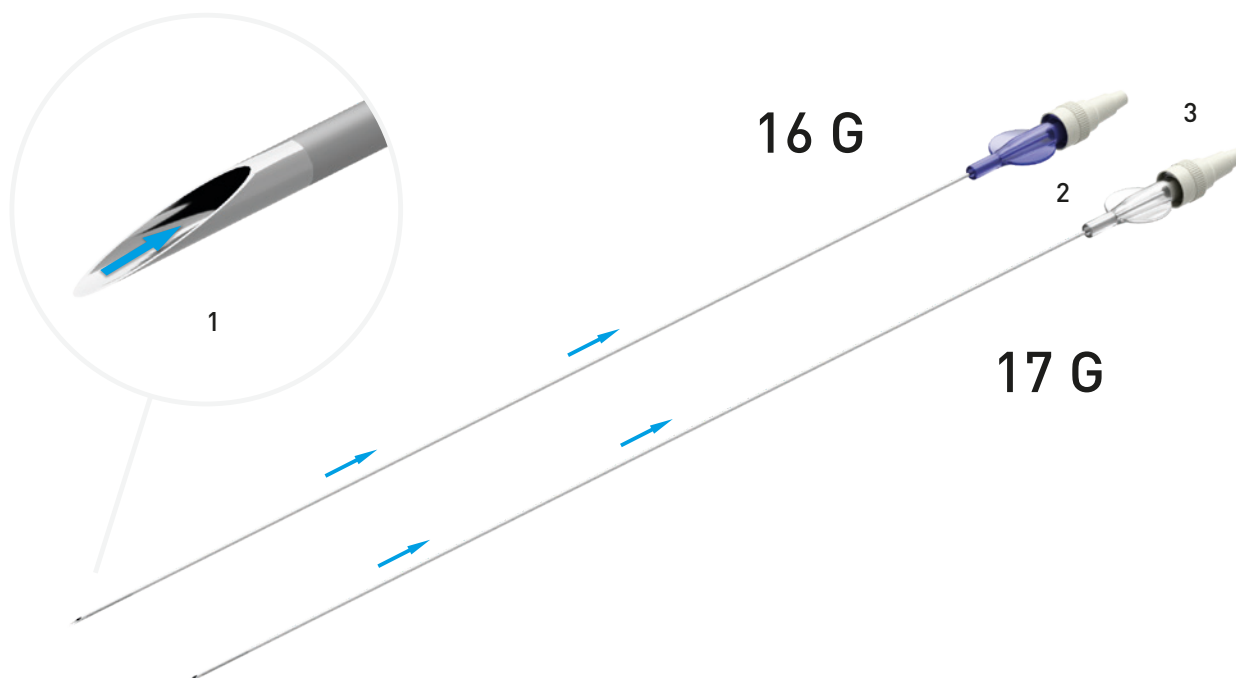

Ago semplice a lume singolo composto da:

- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- un raccordo luer lock (2) che funge da impugnatura e permette una connessione sicura alla siringa;
- due alette laterali in linea con l'affilatura della punta che permettono l'orientamento durante la fase di penetrazione;
- raccordo universale (3) che consente molteplici connessioni.


Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
770312	Luer Lock Azzurro	16 G x 330 mm	10 pz.
770311	Luer Lock Trasparente	17 G x 330 mm	

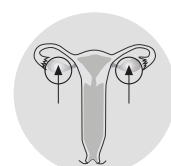

Prelievo Ovocitario

Monocyte-N


Ago per prelievo ovociti

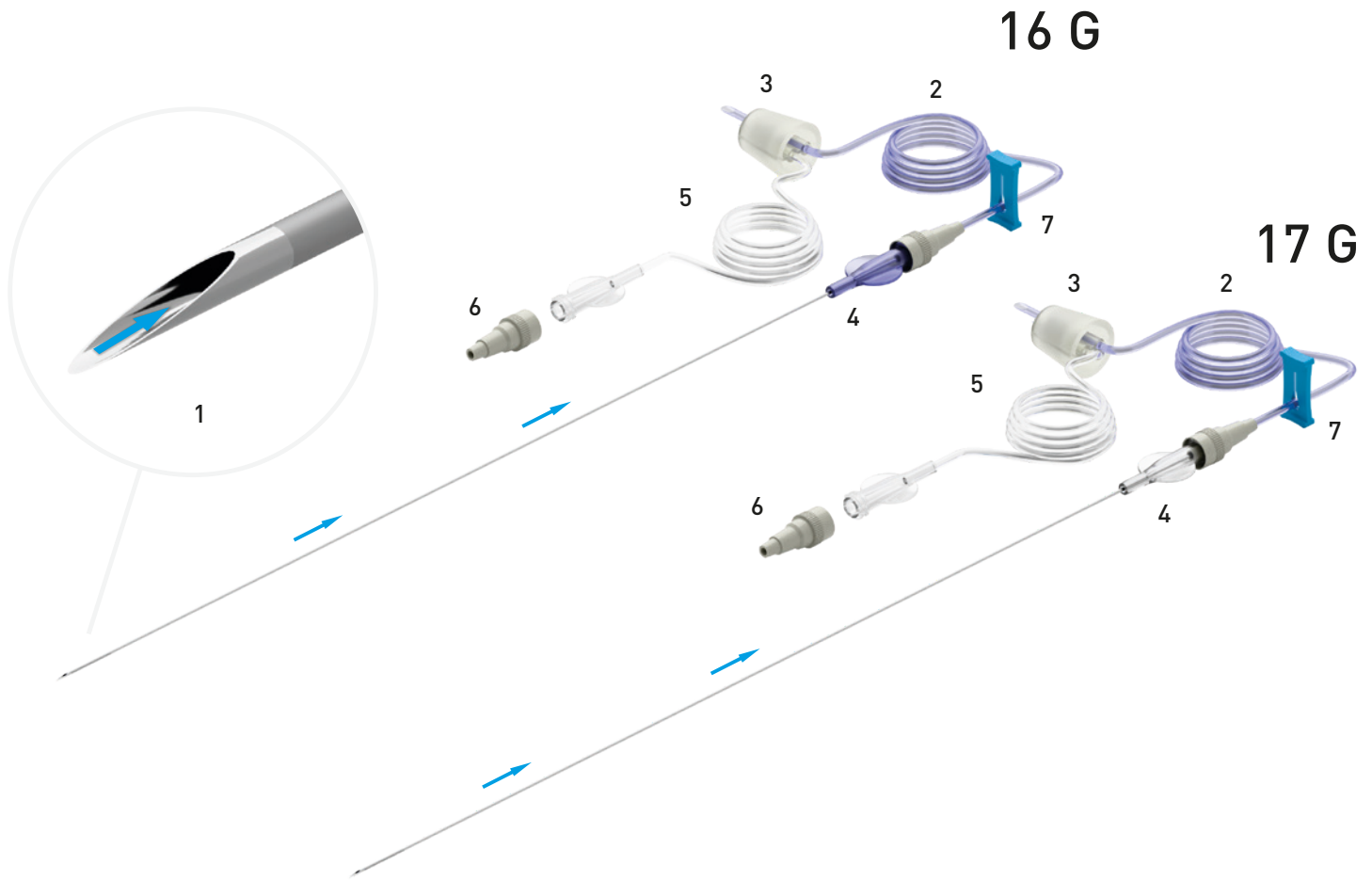

Ago monolume monovia composto da:

- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- tubo azzurrato (2) di aspirazione standard lungo 100 cm.;
- un tappo in gomma termoplastica medica (3) che si connette alla provetta;
- due alette laterali (4) in linea con l'affilatura della punta che permettono l'orientamento durante la fase di penetrazione;
- una piastrina stringitubo (7) che regola l'aspirazione follicolare;
- prolunga di 80 cm che termina con un raccordo luer lock (5);
- ulteriore adattatore universale incluso (6) per una varia tipologia di connessioni.


Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
770300/TL	Luer Lock Azzurro	16 G x 330 mm	10 pz.
770307/TL	Luer Lock Trasparente	17 G x 330 mm	

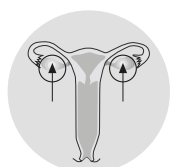

Prelievo Ovocitario

Doublecyte-N


Ago doppio lume per prelievo ovociti e lavaggio follicolare

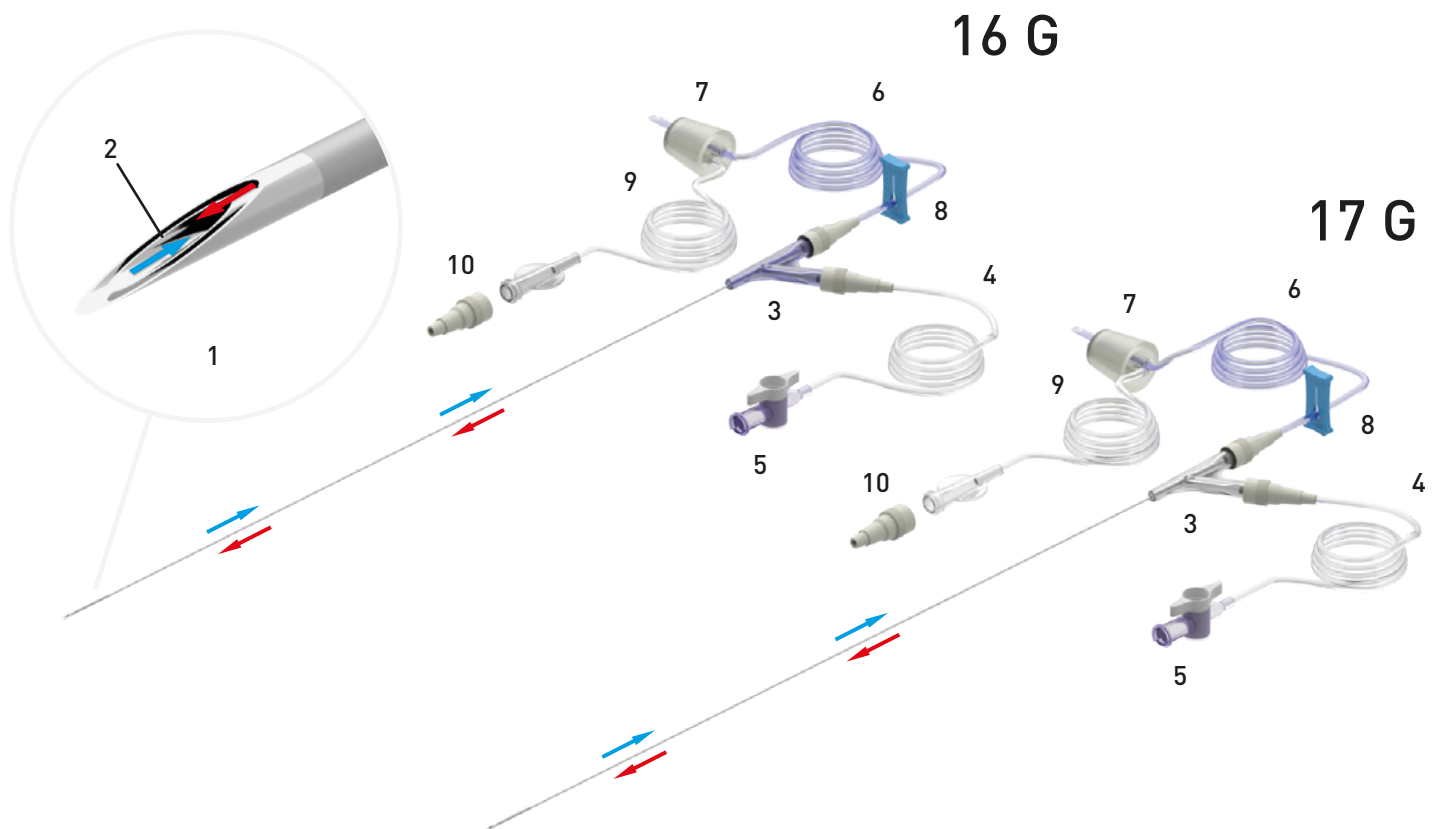

Ago doppio lume a doppia via, la prima per aspirazione dell'ovocita (6) e la seconda per lavaggio follicolare (4), composto da:


- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- un lume interno dell'ago (2) per l'aspirazione ovocitaria che prosegue attraverso un tubo azzurrato (6) di aspirazione standard lungo 100 cm.;
- un tappo in gomma termoplastica medica (7) che si connette alla provetta;
- un raccordo a Y (3), che funge anche da impugnatura, connette l'ago ai tubi di aspirazione e di lavaggio (provvisto di 2 raccordi universali);
- un tubo in materiale trasparente lungo 100 cm (4) per il lavaggio follicolare termina con un rubinetto (5) (il lavaggio avviene attraverso il lume esterno dell'ago);
- una piastrina stringitubo (8) che regola l'aspirazione follicolare;
- prolunga di 80 cm che termina con un luer lock (9);
- ulteriore adattatore universale (10) per una varia tipologia di connessioni.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
770301/TL	Luer Lock Azzurro	16 G x 330 mm	10 pz.
770308/TL	Luer Lock Trasparente	17 G x 330 mm	

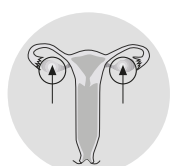

Crioconservazione V-STORK

Dispositivo avanzato per la vitrificazione e conservazione criogenica

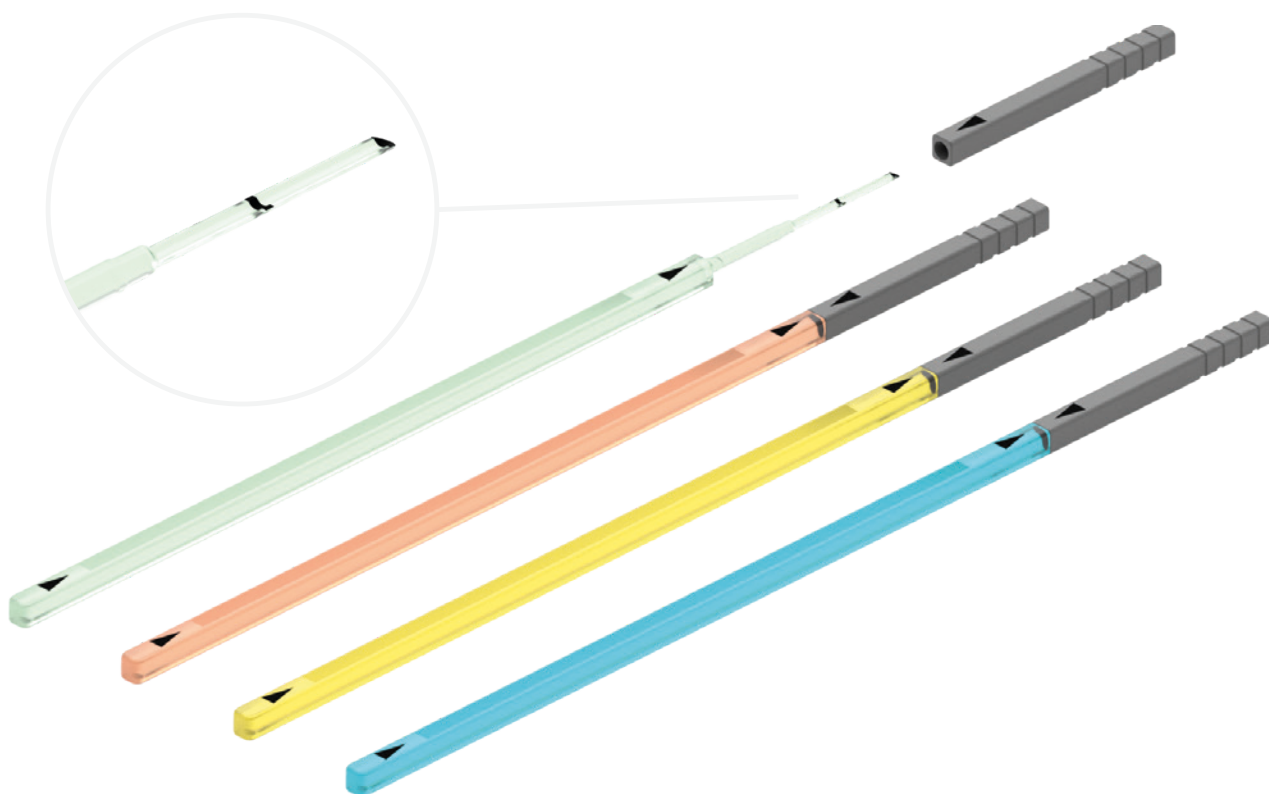

V-STORK è un dispositivo innovativo progettato per la vitrificazione e la conservazione criogenica di ovociti ed embrioni, che unisce efficienza operativa, sicurezza biologica e risultati clinici eccellenti. Grazie al sistema brevettato con chiusura ermetica, garantisce la protezione del campione da qualsiasi contaminazione durante l'intero processo.

La striscia sottile ad alte prestazioni assicura transizioni termiche estremamente rapide, con velocità di raffreddamento fino a $-30.246\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ e riscaldamento fino a $+55.456\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$, preservando l'integrità e la vitalità cellulare.

Il design curvo con punta a "U" facilita le operazioni di caricamento e sigillatura, mentre la superficie ruvida scrivibile e le indicazioni visive di orientamento garantiscono un utilizzo semplice, sicuro e preciso.

Test M.E.A. e LAL confermano la piena biocompatibilità del dispositivo, privo di lattice e ftalati e compatibile con tutti i kit di soluzioni crioprotettici.

Le prestazioni del V-STORK hanno dimostrato un tasso di sopravvivenza post-riscaldamento del 96,7%, con morfologia e distribuzione cromosomica regolari degli ovociti, assicurando elevati tassi di successo nei trattamenti di fertilità.


Disponibile in quattro varianti cromatiche per una gestione ottimale dei campioni.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
VSTRB-G	Vitrificatore blu	10 pz.
VSTRR-G	Vitrificatore rosso	
VSTRG-G	Vitrificatore giallo	
VSTRV-G	Vitrificatore verde	

Trasferimento Embrioni

Transfer Easy

Catetere per trasferimento "facile" di embrioni

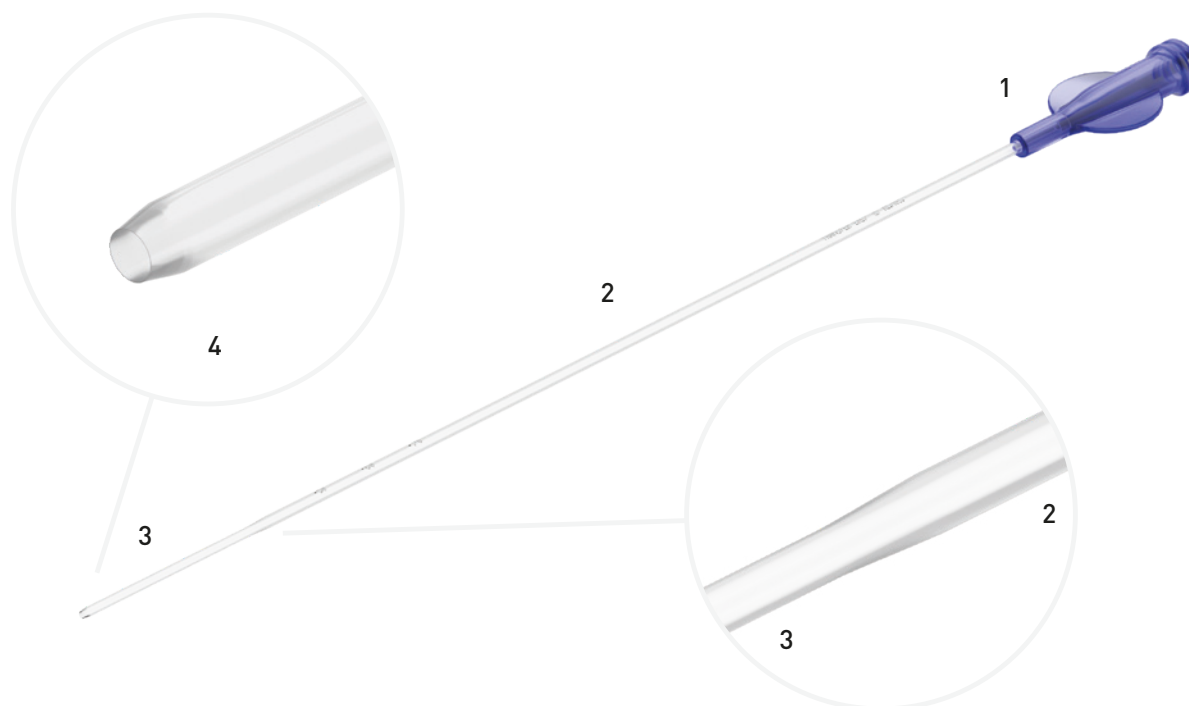

Indicato in presenza di canale cervicale con permeabilità normale.


Il catetere è composto da:

- una porzione prossimale rigida (2);
- una porzione distale morbida e flessibile (3) con punta rastremata (4) che permette un inserimento eco-guidato.

Marcatura sul catetere a 5, 6 e 7 cm dall'estremità distale per un corretto posizionamento nella cavità uterina.

Un raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e permette un attacco sicuro alla siringa.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770116	Ø Estremità prossimale: Ø esterno 2 mm Ø Estremità distale: Ø esterno 1,5 mm Lunghezza 200 mm	12 pz.

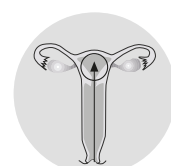

Trasferimento Embrioni

Transfer Omni-L

Catetere per trasferimento "difficile" di embrioni

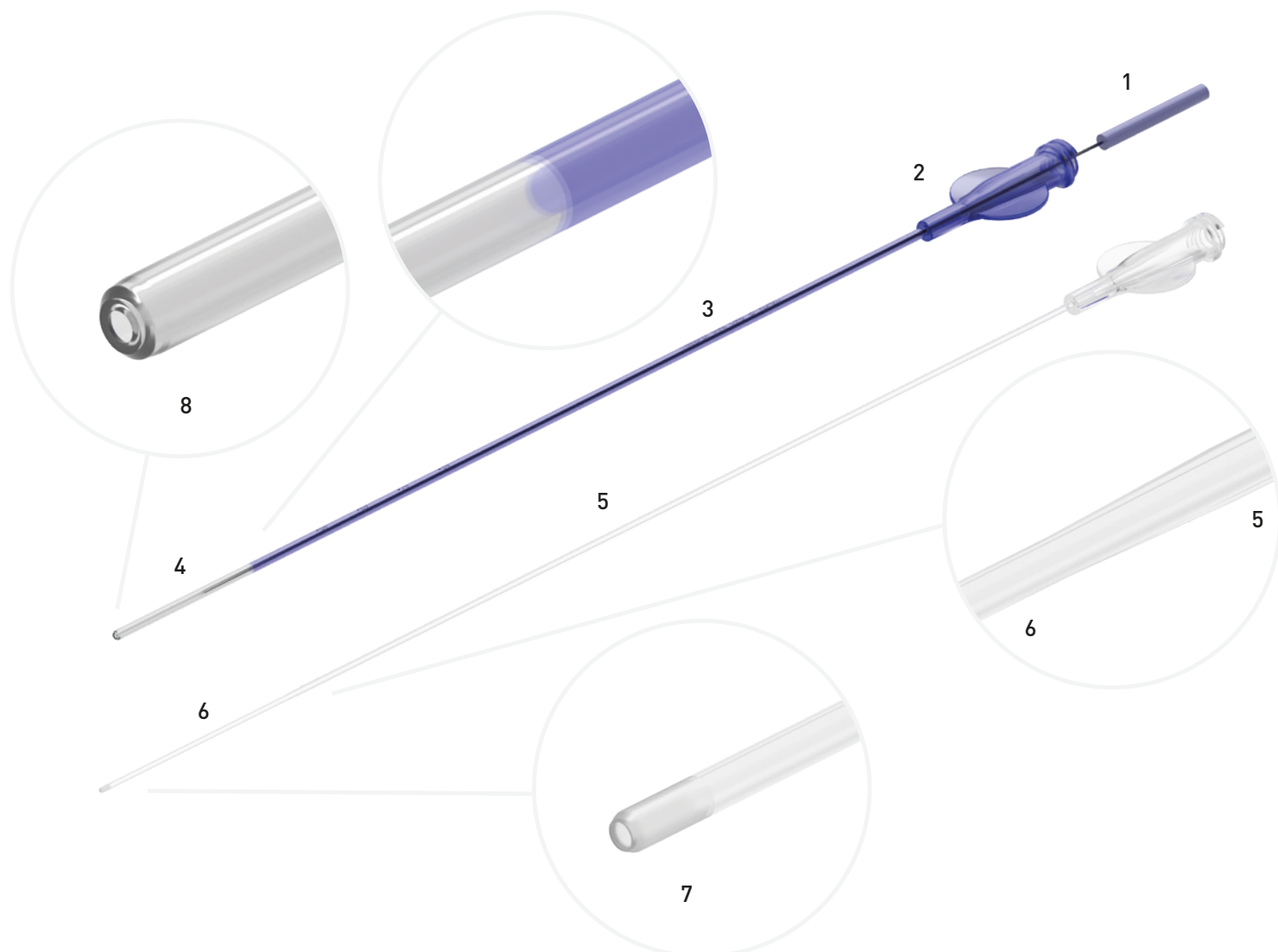


Indicato in presenza di collo dell'utero stenotico grazie al mandrino in acciaio malleabile.

Il set è composto da:

- un catetere introduttore azzurro (3) con scala di misurazione a 5,6,7,8 cm dalla punta;
- estremità distale trasparente e morbida (4) con punta rastremata (8).
- mandrino (1) che permette di curvare il catetere a piacimento;
- raccordo luer lock che funge da impugnatura (2);
- un catetere di trasferimento embrioni con una porzione prossimale rigida (5), una porzione distale morbida (6) con punta rastremata che permette un inserimento eco-guidato (7).


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770406	Catetere introduttore: Ø esterno 2 mm - Lunghezza 200 mm Catetere di trasferimento: Ø esterno 1 mm - Lunghezza 250 mm	12 pz.

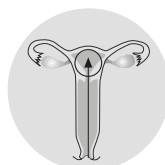

Trasferimento Embrioni

Transfer Omni-S


Catetere per trasferimento "difficile" di embrioni

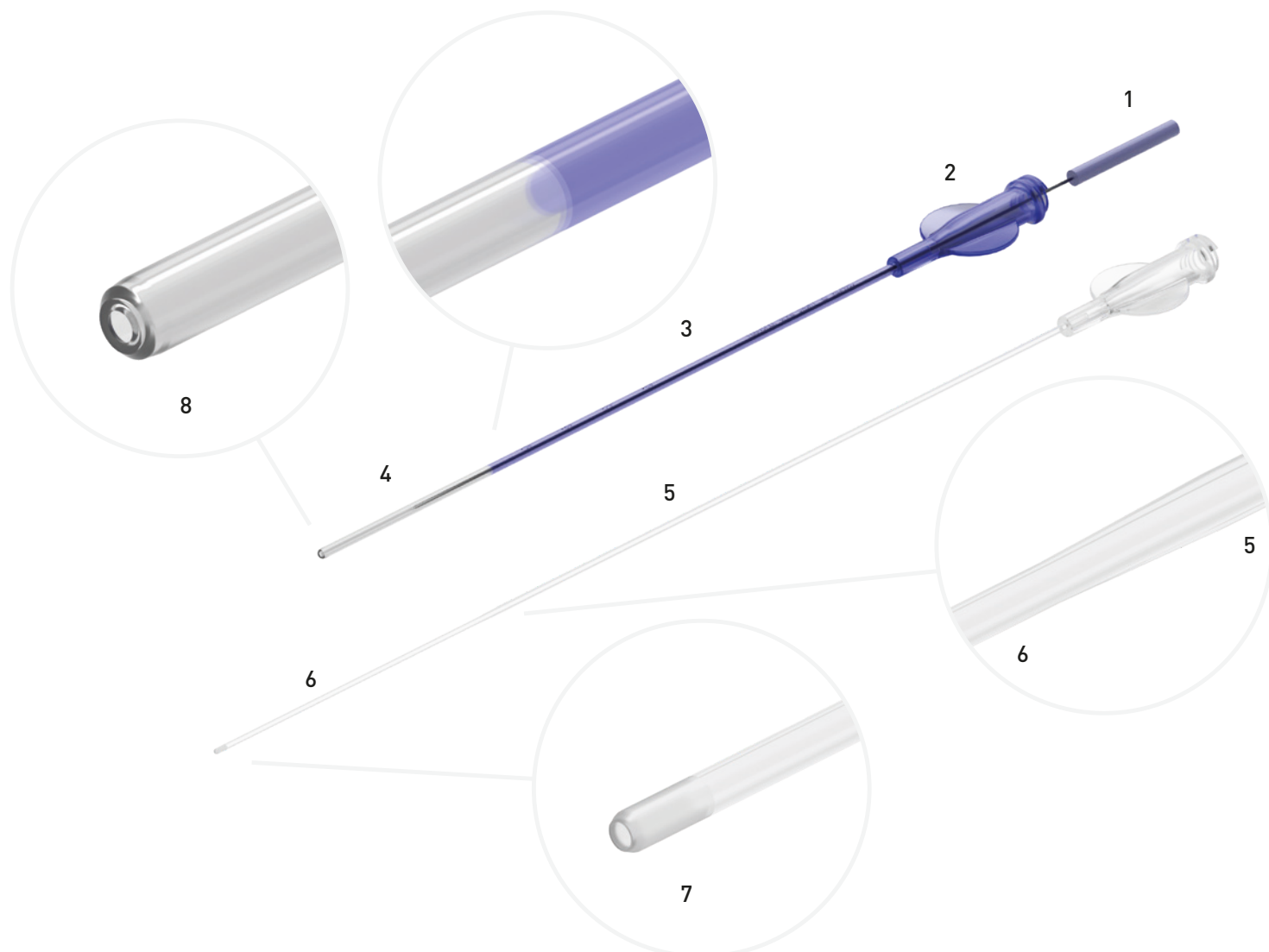

Indicato in presenza di collo dell'utero stenotico grazie al mandrino in acciaio malleabile.
Il set è composto da:

- un catetere introduttore azzurro (3) con scala di misurazione a 5,6,7,8 cm dalla punta;
- estremità distale trasparente e morbida (4) con punta rastremata (8).
- mandrino (1) che permette di curvare il catetere a piacimento;
- raccordo luer lock che funge da impugnatura (2);
- un catetere di trasferimento embrioni con una porzione prossimale rigida (5), una porzione distale morbida (6) e punta rastremata che permette un inserimento eco-guidato (7).

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770407	Catetere introduttore: Ø esterno 2 mm - Lunghezza 140 mm Catetere di trasferimento: Ø esterno 1 mm - Lunghezza 210 mm	12 pz.

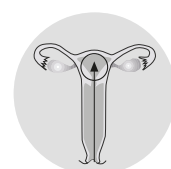

POLITICA DI VENDITA

CLIENTELA

Per maggiori informazioni sui prodotti RI.MOS. contattare: commerciale@rimos.com

Campionature.

A causa dell'elevato numero di richieste, RI.MOS. non fornisce campioni gratuiti in modo automatico. Per eventuali richieste o ulteriori informazioni scrivere a: commerciale@rimos.com

Referenze bancarie:

BPB BANCA SPA

Agenzia di Mirandola (Mo)

IBAN: IT 98 G 05387 66850 00000008006

UNICREDIT SPA

Agenzia di Mirandola (Mo)

IBAN. IT 66 H 02008 66852 000000659010

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prodotti. Tutte le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sui cataloghi RI.MOS. vengono fornite a puro titolo di riferimento.

Tutti i Prodotti elencati nei cataloghi hanno il marchio CE. Tutti i materiali utilizzati per i prodotti monouso soddisfano gli standard internazionali dei materiali plastici utilizzati in dispositivi medicali.

2. Valuta. Tutti i prezzi sono in Euro (EUR).

3. IVA, tasse e diritti. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

4. Spese di trasporto. Tutti i prezzi indicati nel Listino Prezzi / Offerta sono franco stabilimento RI.MOS. (EX WORKS - INCOTERMS 2000). Gli ordini con valore imponibile oltre i 200 EURO saranno spediti franco domicilio dell'ACQUIRENTE, con spese di consegna a carico di RI.MOS. RI.MOS. si riserva di richiedere un contributo fisso di 16,00 EURO nel caso di ordini il cui imponibile non superi i 200 EURO. Nel caso in cui la spedizione fosse in porto assegnato, sarà cura dell'ACQUIRENTE specificare il nome del proprio spedizioniere sull'ordine di acquisto.

5. Validità dei prezzi. Tutti i prezzi sono validi per 60 giorni dalla data dell'offerta, salvo accordi diversi.

6. Ordini di acquisto. L'ACQUIRENTE fornirà gli ordini di acquisto dei Prodotti RI.MOS. per iscritto indicando, come minimo, quanto segue:

- identificazione dei Prodotti ordinati (n° di codice, descrizione);
- quantità (per ciascun modello);
- data di consegna richiesta;
- istruzioni di spedizione e imballaggio e indirizzo di spedizione.

7. Accettazione e conferma degli ordini. Gli ordini saranno considerati accettati dopo essere stati confermati per iscritto da RI.MOS.: la conferma d'ordine sarà inviata all'ACQUIRENTE entro tre (3) giorni lavorativi. Trascorso il periodo di tempo indicato sulla conferma d'ordine, l'ordine si riterrà definitivamente confermato dall'ACQUIRENTE.

8. Condizioni di consegna. Tutte le spedizioni dei Prodotti saranno effettuate entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento di un ordine per Prodotti a magazzino ed entro ventuno (21) giorni lavorativi per i Prodotti non a magazzino, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

9. Modifica degli ordini. Nessun ordine di acquisto accettato sarà modificato o cancellato se non dietro accordo scritto di entrambe le parti.

10. Nessun ordine minimo previsto. All'ACQUIRENTE non è richiesto di acquistare alcun quantitativo minimo di Prodotti. L'ACQUIRENTE concorda comunque di ordinare i Prodotti in quantità standard per confezione (e / o relativi multipli) per facilitare le condizioni di immagazzinaggio e spedizione dei Prodotti.

11. Ordine completo. Gli ordini di acquisto sono considerati spediti in modo completo quando la quantità fatturata corrisponde a quella ordinata.

12. Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento applicate, salvo diversi accordi, sono le seguenti:

- in caso di primo ordine di acquisto: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
- in caso di ordine di acquisto inferiore a 200 Euro di imponibile: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
- in caso di ordine di acquisto superiore a 200 Euro di imponibile: pagamento a 30 o 60 giorni.

13. Metodo di pagamento. Il metodo di pagamento richiesto è il seguente:

- Contrassegno o bonifico anticipato nei casi indicati ai punti §12.a) e §12.b);
- Ricevuta Bancaria a 30 o 60 giorni data fattura fine mese nel caso indicato al punto §12.c). Tutte le informazioni relative alla banca d'appoggio saranno riportate in dettaglio sulla fattura.

14. Garanzia. RI.MOS. garantisce che i Prodotti venduti sono privi di difetti per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione all'ACQUIRENTE. Durante tale periodo si garantiscono i Prodotti per la qualità dei materiali e della manodopera impiegati nella loro fabbricazione. RI.MOS. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati dai Prodotti da movimentazione e / o manutenzione effettuata da personale non autorizzato. Qualsiasi intervento di movimentazione e / o manutenzione non autorizzata effettuato durante il periodo della garanzia comporterà l'annullamento immediato della presente garanzia. Se, ad insindacabile giudizio di RI.MOS., i Prodotti risultano difettosi a causa di un difetto originale di materiale o manodopera tali prodotti saranno sostituiti da RI.MOS. gratuitamente. I Prodotti che risultano difettosi per negligenza o uso improprio, installazione o manutenzione scorretta, uso scorretto, trascuratezza nel trasporto e nella movimentazione, variazioni nei materiali o nelle dimensioni dei Prodotti causate dall'esposizione a sostanze chimiche e / o temperature inadeguate durante l'immagazzinamento dei Prodotti senza adottare le precauzioni necessarie o a qualsiasi circostanza che non risulti da difetti di fabbricazione non sono coperti dalla presente garanzia. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di fabbricazione la garanzia copre la sola sostituzione. Tuttavia la presente garanzia non prevede la sostituzione e l'indennizzo per danni diretti o indiretti o di qualsiasi natura arrecati a persone o cose. RI.MOS. non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possano risultare direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle disposizioni indicate nelle istruzioni e specialmente relative alle istruzioni di installazione, uso, manutenzione, spedizione e immagazzinaggio. I Prodotti difettosi sostituiti in base alla presente garanzia rimarranno di proprietà di RI.MOS.

15. Procedura di resa delle merci. Eventuali reclami in merito alla spedizione, consegna, quantità e qualità devono essere presentati entro otto (8) giorni dalla data di consegna delle merci. Eventuali lamentele riguardanti la mancanza di materiale o il danneggiamento dello stesso saranno accettate da RI.MOS. solamente se accompagnate dalla copia del documento di consegna riportante le riserve espresse allo spedizioniere al momento di ricevimento della merce. Tutti i resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati da RI.MOS. in base alle proprie procedure interne. Le merci dovranno essere rese nelle confezioni originali e i cartoni dovranno essere adeguatamente sigillati. Tutte le spese di spedizione per le merci rese dall'ACQUIRENTE allo stabilimento di RI.MOS. saranno a carico dell'ACQUIRENTE, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

16. Forza Maggiore. Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per ritardi o incapacità di soddisfare alcun obbligo nel caso in cui tale ritardo o incapacità sia dovuto ad una qualsiasi delle seguenti cause: scioperi, serrate, disaccordi tra direzione e lavoratori, ritardo nei trasporti, carenze di materie prime, atti di autorità governative, incendi, rivolte, cause di forza maggiore o qualsiasi altra causa o cause, siano esse o meno di carattere simile, che sfuggano al controllo di tale parte.

17. Dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante dalle presenti condizioni di vendita o in connessione ad esse e che non potessero essere composte in via amichevole, saranno composte in maniera definitiva in base al Codice di Diritto Italiano. Per qualsiasi eventuale processo, nel solo ed esclusivo interesse di RI.MOS., sarà competente il Tribunale di Modena (Italia).

NOTE



Visitando il sito
potrete avere una panoramica costantemente aggiornata
della gamma completa dei prodotti RI.MOS.
e delle **ultime novità**.

www.rimos.com



RI.MOS. s.r.l.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com