

Ainseblue

Canule d'insémination intra-utérine
avec extrémité distale flexible

*Cánula de inseminación intrauterina
con extremo distal flexible*



 Pour faciliter le transfert de liquide seminal dans la cavité utérine lors des procédures d'IA.

Canule transparente et radio-opaque avec deux degrés de flexibilité différents :

- une partie proximale rigide (2) pour une insertion facile à travers le col de l'utérus ;
- une partie distale souple et flexible (3) pour un transfert séminal délicat et atraumatique;
- 2 ouvertures latérales à l'extrémité de la pointe qui permettent une distribution optimale du liquide séminal.

Échelle de mesure (50-60-70 mm)* sur la canule.
Un raccord Luer Lock (1) agit comme une poignée et permet une connexion sécurisée à la seringue.

Les deux ailes latérales (2) alignées avec les 2 ouvertures sur la pointe reflètent l'orientation lors du positionnement.

* Fournit une mesure approximative.

 Para facilitar la transferencia del semen a la cavidad uterina en los procedimientos de IA.

Cánula transparente y radiopaca con dos grados diferentes de flexibilidad:

- una parte proximal rígida (2) para facilitar la inserción a través del cuello uterino;
- una parte distal blanda y flexible (3) para una transferencia seminal delicada y no traumática;
- 2 orificios laterales en la punta para una distribución óptima del líquido seminal.


Escala de medición (50-60-70 mm)* en la cánula.

Un conector luer lock (1) actúa como empuñadura y permite una conexión segura a la jeringa.

Las dos aletas laterales (2) alineadas con los 2 orificios en la punta permiten la orientación durante el posicionamiento.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770113	Ø extérieur 2 mm Ø intérieur 1,3 mm Longueur 174 mm Ø exterior 2 mm Ø interior 1.3 mm Longitud 174 mm	24 pièces/uds.

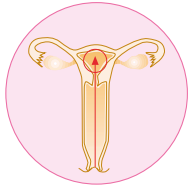

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051