

Ainsegrey

Canule d'insémination intra-utérine
Cánula de inseminación intrauterina




 Pour faciliter le transfert de liquide seminal dans la cavité utérine lors des procédures d'IA. La canule centimétrique souple*(3) a une pointe arrondie (4), deux ouvertures latérales et mandrin en acier (1) pour une insertion facile. Un raccord Luer Lock agit comme poignée et permet une connexion sécurisée à la seringue. Les deux ailes latérales (2), alignées avec les 2 ouvertures sur la pointe, reflètent l'orientation lors du positionnement. À ne pas utiliser pour les procédures de transfert d'embryons.

* Fournit une mesure approximative.

 Para facilitar la transferencia del semen a la cavidad uterina en los procedimientos de IA. La cánula blanda graduada en centímetros*(3) tiene una punta redondeada (4), dos orificios laterales y un mandril de acero (1) para facilitar la inserción. Un conector luer lock actúa como empuñadura y permite una conexión segura a la jeringa. Las dos aletas laterales (2), alineadas con los 2 orificios en la punta, permiten la orientación durante el posicionamiento. No deben utilizarse para los procedimientos de transferencia embrionaria.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770220	Ø extérieur 2 mm Ø intérieur 1,2 mm Longueur 195 mm Ø exterior 2 mm Ø interior 1.2 mm Longitud 195 mm	24 pièces/uds.

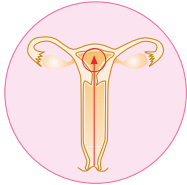

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051