


Amniocent

Aiguille pour amniocentèse avec
canule centimétrique

*Aguja para amniocentesis con
cánula graduada en cm*

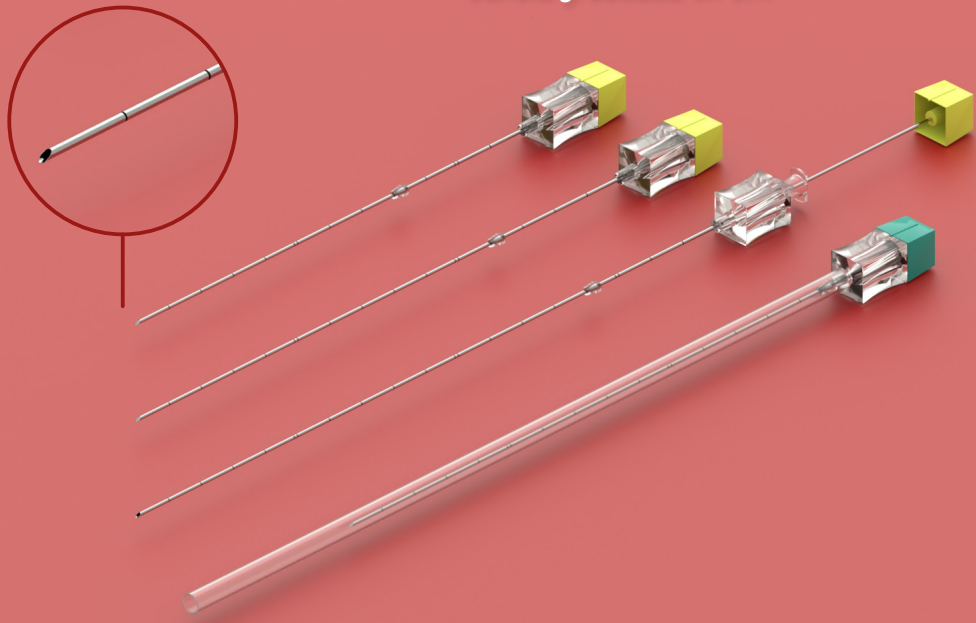

Pour le prélèvement transabdominal de liquide amniotique (généralement effectué entre la 15^{ème} et la 18^{ème} semaine de grossesse) pour le diagnostic prénatal des anomalies génétiques du fœtus. Également utilisé pour les examens cytogénétiques et biochimiques. Le mandrin est équipé d'une pointe éco-marqué qui permet une insertion guidée par ultrasons. La canule est équipée d'une butée coulissante pour déterminer la profondeur d'insertion de l'aiguille et d'un connecteur Luer Lock pour la collecte de liquide amniotique au moyen d'une seringue.

AMNIOCENT est disponible en 4 tailles différentes. La canule est centimétrique (résolution 1 cm)* et possède un double repère à 5 cm.

* Fournit une mesure approximative.




Para la extracción de muestras transabdominales de líquido amniótico (que suele realizarse entre las semanas 15 y 18 del embarazo) para el diagnóstico prenatal de defectos genéticos del feto. También se utiliza para análisis citogenéticos y bioquímicos. El émbolo cuenta con una punta ecomarcada que permite una inserción ecoguiada. La cánula posee con un aplicador ajustable para determinar la profundidad de inserción de la aguja y un conector luer lock para recoger el líquido amniótico con una jeringa.

AMNIOCENT está disponible en 4 medidas diferentes. La cánula está graduada en cm. (resolución de 1 cm)* y tiene una doble marca de referencia a 5 cm.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
772007	Jaune Amarillo	20 G x 120 mm	25 pièces/uds.
772004	Jaune Amarillo	20 G x 150 mm	
772006	Jaune Amarillo	20 G x 180 mm	
772001	Vert Verde	21 G x 150 mm	

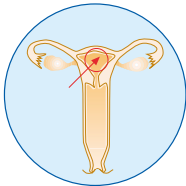

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051