


Amnioram

Aiguille pour amniocentèse
Aguja para amniocentesis

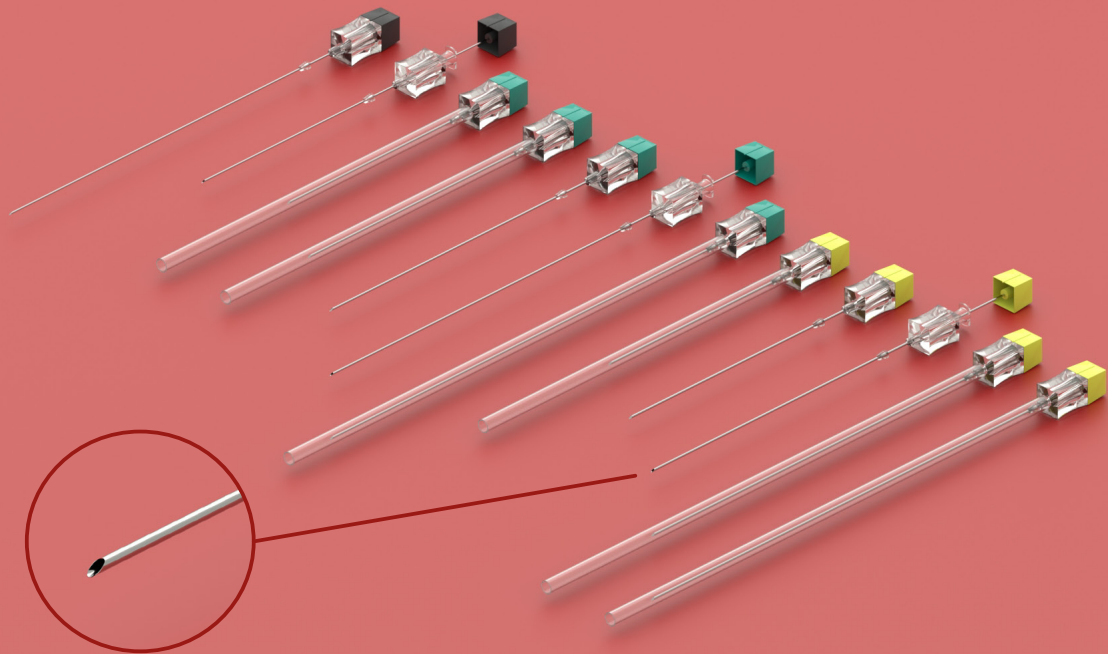

Pour le prélèvement transabdominal de liquide amniotique (généralement effectué entre la 15ème et la 18ème semaine de grossesse) pour le diagnostic prénatal des anomalies génétiques du fœtus. Également utilisé pour les examens cytogénétiques et biochimiques. Le mandrin est équipé d'une pointe éco-marquée qui permet une insertion guidée par ultrasons. La canule est équipée d'une butée coulissante pour déterminer la profondeur d'insertion de l'aiguille et d'un connecteur Luer Lock pour la collecte de liquide amniotique au moyen d'une seringue.

AMNIORAM est disponible en 11 tailles différentes.



Para la extracción de muestras transabdominales de líquido amniótico (que suele realizarse entre las semanas 15 y 18 del embarazo) para el diagnóstico prenatal de defectos genéticos del feto. También se utiliza para análisis citogenéticos y bioquímicos. El émbolo cuenta con una punta ecomarcada que permite una inserción ecoguiada. La cánula posee con un aplicador ajustable para determinar la profundidad de inserción de la aguja y un conector luer lock para recoger el líquido amniótico con una jeringa.

AMNIORAM está disponible en 11 medidas diferentes.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770212	Jaune / Amarillo	20 G x 80 mm	25 pièces/uds.
770228	Jaune / Amarillo	20 G x 100 mm	
770222	Jaune / Amarillo	20 G x 120 mm	
770224	Jaune / Amarillo	20 G x 150 mm	
770201	Jaune / Amarillo	20 G x 180 mm	
770226	Vert / Verde	21 G x 80 mm	
770227	Vert / Verde	21 G x 100 mm	
770223	Vert / Verde	21 G x 120 mm	
770202	Vert / Verde	21 G x 150 mm	
770229	Vert / Verde	21 G x 180 mm	
770233	Noir / Negro	22 G x 90 mm	
770232	Noir / Negro	22 G x 150 mm	

Fornito in confezione singola -
monouso - sterilizzazione a EtO -
marcato CE 0051

Supplied in single packaging -
disposable - EtO sterilization -
CE 0051 marked

