


Handlin

Manipulateur/injecteur utérin
Manipulador/inector uterino

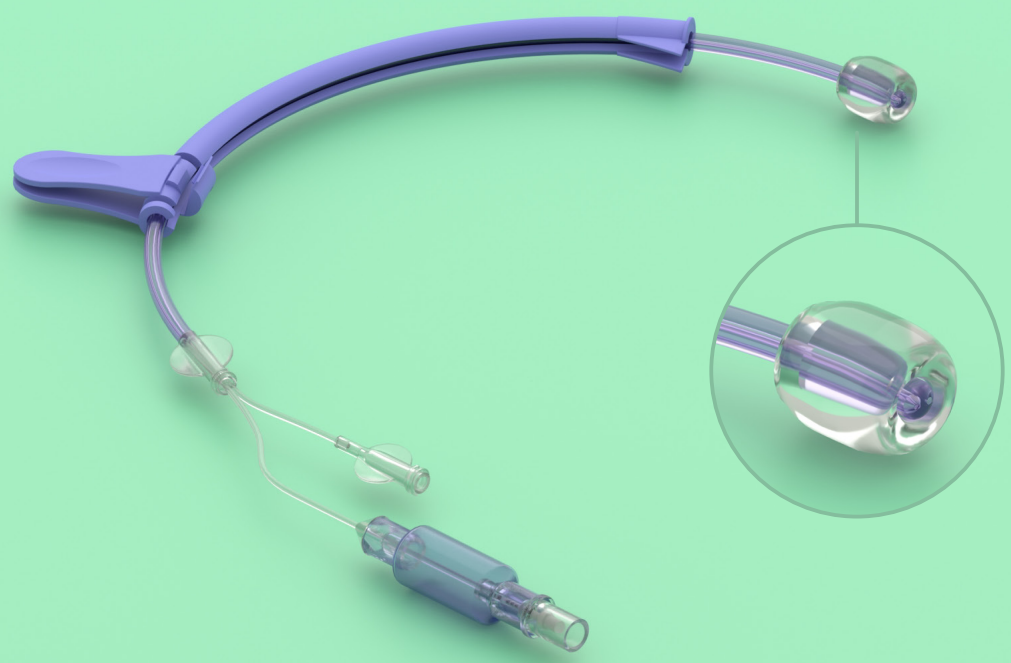

 Utilisé dans les procédures où la manipulation de l'utérus est nécessaire et/ou pour injecter des fluides de contraste en cas de laparoscopie diagnostique, tests de fertilité, etc.

Il se caractérise par une forme incurvée qui facilite son insertion.

Équipé de:

- un cathéter interne à deux lumières avec une échelle de mesure de 4 à 10 cm (résolution 1 cm)* pour déterminer la correcte profondeur d'insertion;
- une poignée rigide;
- un système de blocage simple et sûr qui empêche les mouvements accidentels pendant la procédure;
- un ballon en PVC de 10 cc et 20 mm de diamètre logé sur la pointe du cathéter afin de minimiser la possibilité de perforation accidentelle et d'éviter le reflux du produit de contraste;
- une valve unidirectionnelle pour gonfler le ballon, assemblée à un poumon de référence qui permet de visualiser l'état réel du ballon interne;
- un connecteur luer lock pour l'injection du produit de contraste.

* Fournit une mesure approximative.

 Se utiliza en procedimientos en los que se requiere manipulación uterina y/o para inyectar líquidos de contraste (como laparoscopia diagnóstica, exámenes de fertilidad, etc.).

Se caracteriza por una forma curvada que facilita la inserción.

Dotado de:

- un catéter interno de dos conductos con una escala de medición de 4 a 10 cm (resolución de 1 cm)* para determinar la profundidad de inserción correcta;
- un mango rígido;
- un sistema de bloqueo sencillo y seguro que impide el movimiento accidental durante el procedimiento;
- un balón de PVC de 10 cc y 20 mm de diámetro colocado en la punta del catéter para minimizar la posibilidad de perforación accidental y evitar el reflujo del medio de contraste;
- una válvula unidireccional para inflar el balón, unida a un dispositivo de referencia que permite visualizar el estado real del balón interno;
- un conector luer lock para la inyección del medio de contraste.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720199	Ø extérieur 5 mm Ø exterior 5 mm	10 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

