


IUD Extractor

Dispositif pour le retrait du stérilet intra-utérin

Dispositivo para la extracción del DIU

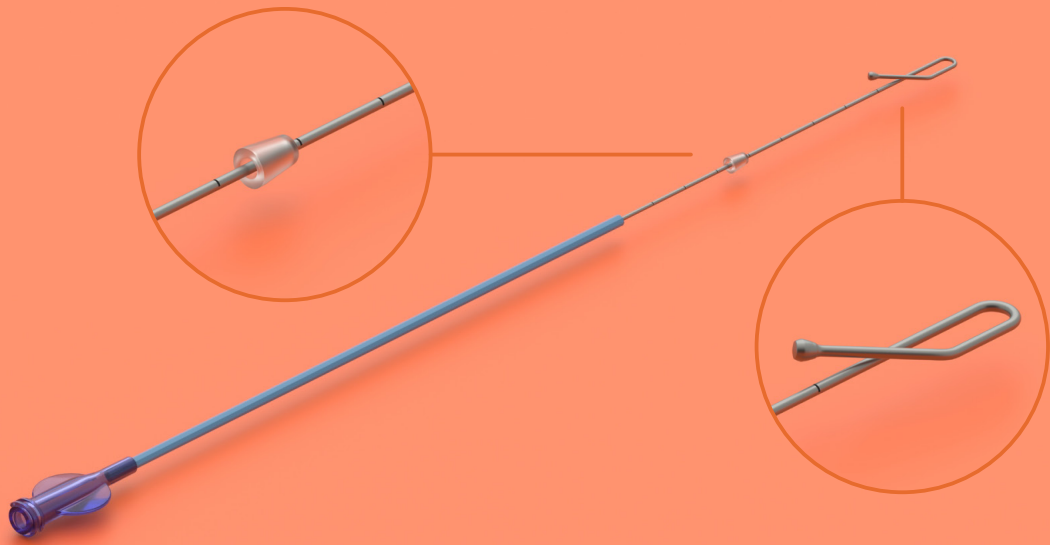

Indiqué pour le retrait du stérilet intra-utérin dans les cas où le fil de repérage n'est pas visible ou pour les stérilets qui n'en ont pas (type anneau chinois). La conception de la pointe permet une insertion et une fixation faciles du fil ou de la structure du stérilet à retirer. L'olive au bout de la pointe évite les traumatismes tissulaires. La canule en acier présente une échelle de mesure de 9 cm (résolution 1 cm)* et est équipée d'une butée coulissante pour déterminer la profondeur d'insertion.

* Fournit une mesure approximative.

Indicado para la extracción de DIU en los casos en que el hilo de guía no es visible o para dispositivos que no contienen este último (tipo anillo chino). El diseño de la punta permite insertar y enganchar fácilmente el hilo o la estructura del DIU que se va a extraer. El diseño del extremo de la punta evita causar traumatismos de los tejidos. La cánula de acero tiene una escala de medición de 9 cm (resolución de 1 cm)* y cuenta con un aplicador ajustable para determinar la profundidad de inserción.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770123	Longueur 28,5 cm Longitud 28.5 cm	10 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

