


Mininjector CM

Injecteur utérin pour sonohystérographie

Inyectoros uterinos para histerosonografía

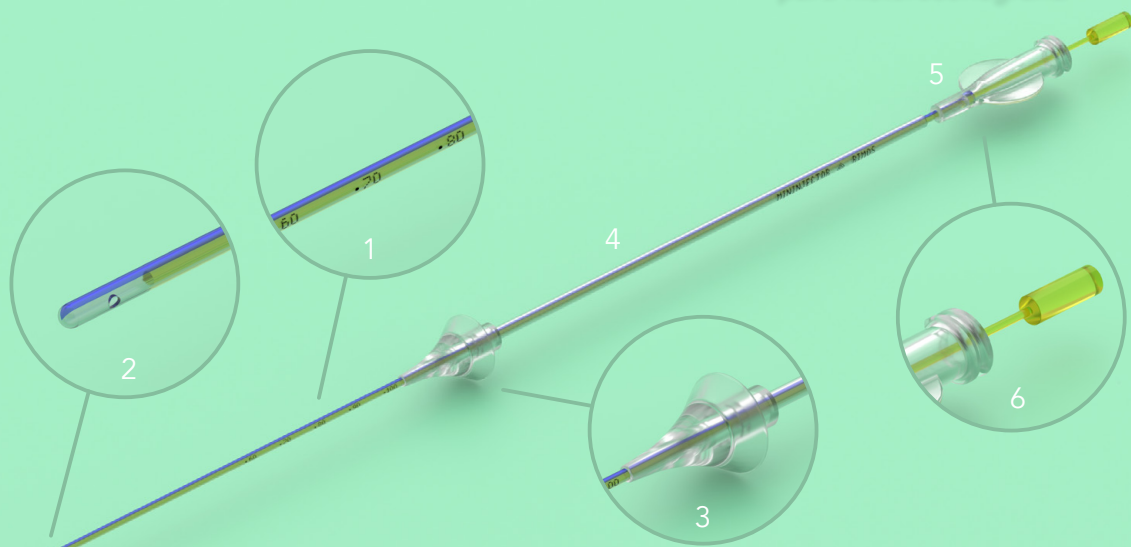

 Pour l'injection de solution saline dans les procédures de sonohystérographie.

Le dispositif se compose de :

- un cathéter centimétrique transparent (1) pour un positionnement facilité. La bande bleue radio-opaque le rend visible à l'échographie ;
- une pointe souple avec une ouverture latérale (2) ;
- un bouchon conique (3) en matière plastique souple qui assure son étanchéité sur le col de l'utérus ;
- un introducteur rigide (4) qui facilite l'insertion dans le col de l'utérus ;
- connecteur Luer lock femelle (5) pour la connexion de la seringue.
- mandrin (6) pour un accès facilité dans la cavité utérine.

 Para la inyección de solución salina en procedimientos de histerosonografía.

El dispositivo incluye:

- un catéter transparente graduado en cm. (1) para facilitar su colocación. La línea radiopaca azul permite su seguimiento radiológico;
- una punta suave con orificio lateral (2);
- un aplicador cónico (3) de plástico blando que asegura un cierre hermético en el cuello del útero;
- un introductor rígido (4) para facilitar la inserción en el cuello uterino;
- conector luer lock hembra (5) para la conexión de la jeringa.
- émbolo (6) para facilitar el acceso a la cavidad uterina.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
880314	Ø extérieur 1,67 mm, avec mandrin (5 Fr) Ø exterior 1.67 mm (5 Fr), con émbolo	15 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

