


Ramcurette

Curette pour prélèvement endométrial
par aspiration (méthode Vabra)

*Cureta para la aspiración endometrial
(método Vabra)*

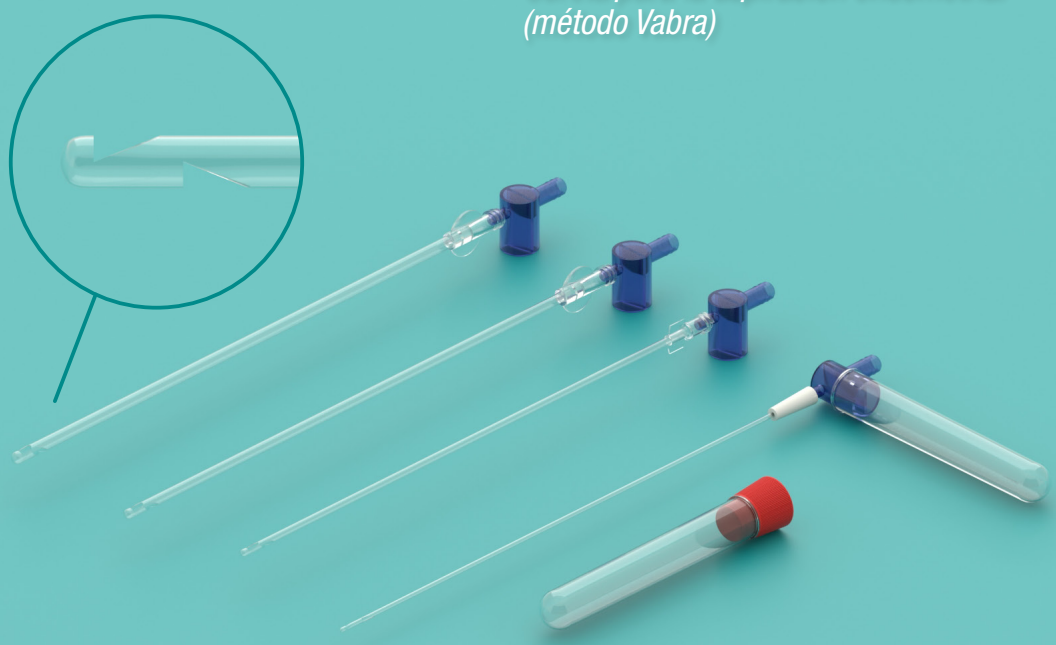

 Pour un prélèvement cyto-histologique de l'endomètre et curetage thérapeutique sans anesthésie.
Le set se compose de:

- une curette avec raccord luer à raccorder au déviateur de flux avec filtre;
- un tube à essai à connecter au déviateur pour le prélèvement d'échantillons.

Le set peut être connecté à un aspirateur par un tuyau.
Le profil de la pointe rend la procédure précise et efficace.
Pour une collecte plus abondante, nous recommandons de rincer la pointe à l'intérieur du tube à la fin de la collecte.

 Para una extracción cito-histológica del endometrio y un legrado terapéutico sin anestesia.
El kit incluye:

- una cureta con conector luer que se conecta al desviador de flujo con filtro;
- un tubo que se conecta al desviador para la recogida de muestras.

El kit puede conectarse a un aspirador mediante un tubo.
El perfil de la punta permite que el procedimiento sea preciso y eficaz.
Para una recogida más abundante, se recomienda enjuagar la punta dentro del tubo al final de la extracción.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720109	Longueur 22,5 cm - Ø extérieur 2 mm Longitud 22.5 cm - Ø exterior 2 mm	50 pièces/uds.
720110	Longueur 22,5 cm - Ø extérieur 3 mm Longitud 22.5 cm - Ø exterior 3 mm	
720111	Longueur 22,5 cm - Ø extérieur 4 mm Longitud 22.5 cm - Ø exterior 4 mm	
720211	Longueur 22,5 cm - Ø extérieur 5 mm Longitud 22.5 cm - Ø exterior 5 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

