


Rampipella

Dispositif de prélèvement endométrial
(mucus - sperme)
*Dispositivo de extracción endometrial
(moco - esperma)*

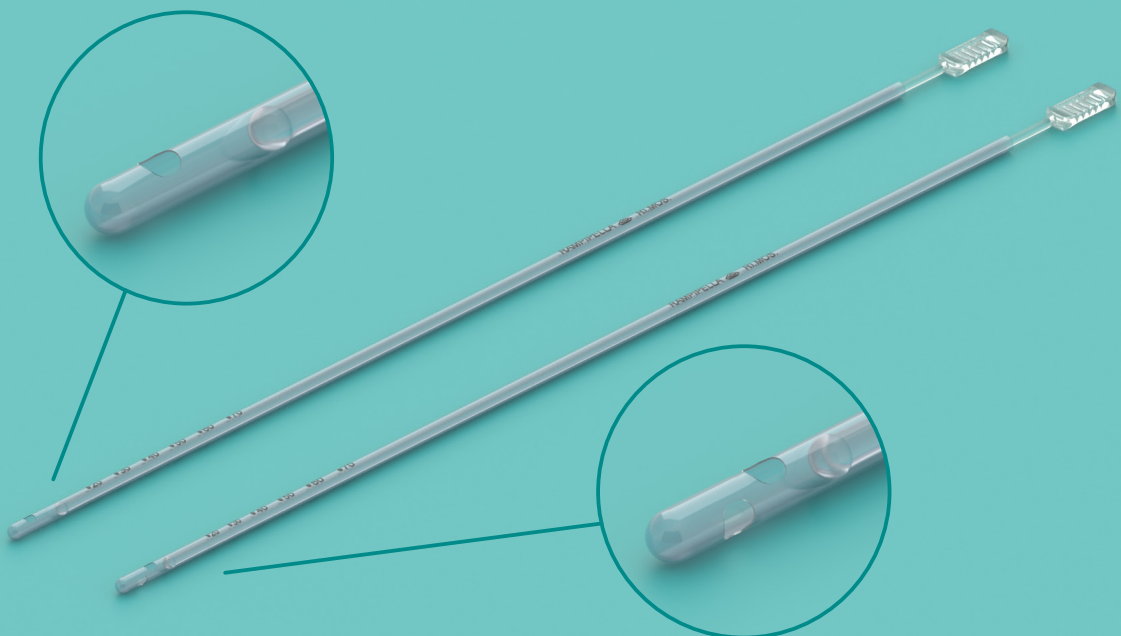

 Pour un prélèvement cytologique endométrial simple et indolore.
L'aspiration d'échantillons se fait manuellement au moyen d'un piston qui coulisse à l'intérieur d'une gaine extérieure.
Canule centimétrique avec échelle de 1 à 7 cm (résolution 1 cm)*
Évite la dilatation ou la traction du col de l'utérus.
Deux versions disponibles: avec 1 ouverture latérale et avec 2 ouvertures latérales à l'extrémité.

* Fournit une mesure approximative.

 Para una extracción endometrial citológica fácil e indolora.
La aspiración de la muestra se realiza manualmente mediante un émbolo que se desliza dentro de la cubierta exterior.
Cánula graduada en cm con escala de 1 a 7 cm (resolución de 1 cm)*
Evita la dilatación o la tracción del cuello uterino.
Dos modelos disponibles: con 1 orificio lateral y con 2 orificios laterales en el extremo.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720196	Longueur 24,5 cm - Ø extérieur 3 mm - avec 1 trou Longitud 24.5 cm - Ø exterior 3 mm - con 1 orificio	100 pièces/uds.*
720218	Longueur 24,5 cm - Ø extérieur 3 mm - avec 2 trous Longitud 24.5 cm - Ø exterior 3 mm - con 2 orificios	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051
* Également disponible en boîtes de 25 pièces sur demande

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051
* Disponible también en cajas de 25 unidades bajo petición

