


Rigidinjector

Injecteurs utérins pour hystérosalpingographie
Inyectores uterinos para histerosalpingografía

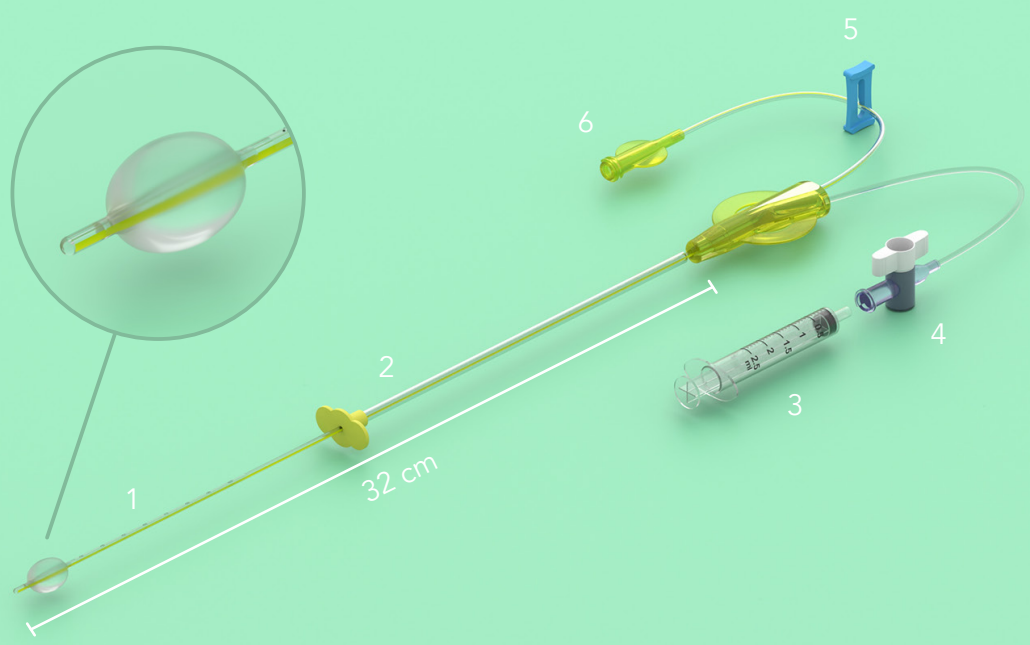


 Pour l'injection de produit de contraste (radio-opaque / bleu de méthylène) dans les procédures d'hystérosalpingographie. Ils se composent de:

- un introducteur rigide équipé d'une butée coulissante (2);
- un cathéter rigide radio-opaque à 2 lumières (1) équipé d'un ballon ovale en caoutchouc thermoplastique de 2,5 cc sur la partie distale qui assure un logement stable du cathéter;
- robinet (4) pour régler le gonflage du ballon;
- collier de serrage pour éviter le reflux de liquide (5);
- un connecteur Luer Lock femelle (6) pour l'injection du produit de contraste;
- une seringue de 2,5 cc (3).

 Para la inyección de medios de contraste (radiopaco / azul de metileno) en los procedimientos de histerosalpingografía. Incluyen:

- un introductor rígido con un aplicador ajustable (2);
- un catéter rígido radiopaco de 2 conductos (1) con un balón ovalado de goma termoplástica de 2,5 cc en la parte distal que garantiza un posicionamiento estable del catéter;
- una válvula (4) para regular el inflado del balón;
- una abrazadera para evitar el reflujo del líquido (5);
- un conector luer lock hembra (6) para la inyección del medio de contraste;
- una jeringa de 2,5 cc (3).

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720239	Ø extérieur 1,67 mm (5 Fr) Ø exterior 1.67 mm (5 Fr)	10 pièces/uds.
720225	Ø extérieur 2 mm (6 Fr) Ø exterior 2 mm (6 Fr)	
720251	Ø extérieur 2,33 mm (7 Fr) Ø exterior 2.33 mm (7Fr)	

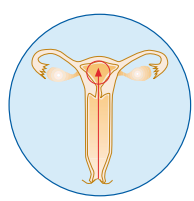

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051