


Rovac

Set tuyau d'aspiration
Set tubo de aspiración

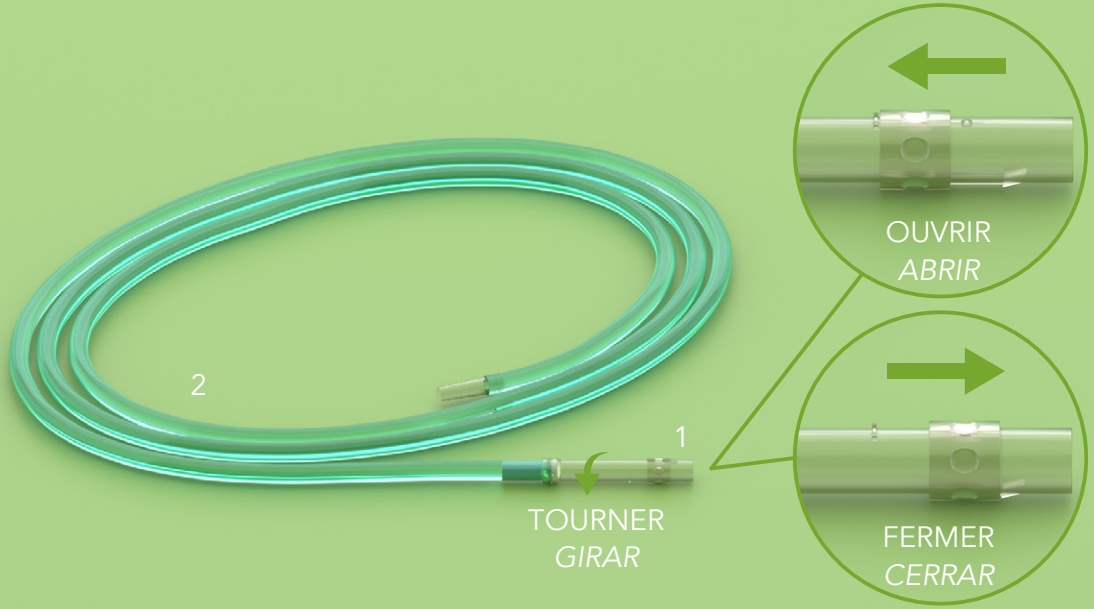


Pièce à main et adaptateur, sans tube
Mango y adaptador, sin tubo

Manipolo Rovac

 Utilisé dans les procédures d'interruption volontaire de grossesse ou à la suite d'un avortement spontané. La pièce à main rotative (1) est reliée à un tuyau de 2 mètres (2) qui se termine par un adaptateur pour la pompe d'aspiration. L'aspiration est régulée par une vanne de régulation qui peut être facilement activée avec un doigt. La pièce à main peut être tournée à 360° pour une évacuation complète de la cavité utérine évitant le vrillage du tube. L'encoche sur la pièce à main indique l'orientation correcte de la pointe de la curette. L'épaisseur du tube évite les risques d'affaissement et la transparence rend visible la matière aspirée. Compatible avec toutes les pompes d'aspiration.

 Utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo o tras un aborto espontáneo. El mango giratorio (1) está conectado a un tubo de 2 metros (2) que termina con un adaptador para la bomba de aspiración. La aspiración se regula a través de una válvula de control que se puede activar fácilmente con el dedo. El mango se puede girar 360° para una evacuación completa de la cavidad uterina sin doblar el tubo. La muesca del mango indica la orientación correcta de la punta de la cureta. El grosor del tubo evita el riesgo de colapso y la transparencia permite visualizar el material aspirado. Compatible con todas las bombas de aspiración.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720133 stérile estéril	Longueur 200 cm Ø extérieur 15 mm - Ø intérieur 10 mm	20 pièces (emballées individuellement) 20 uds. (envasado individualmente)
720134 non stérile no estéril	Longitud 200 cm Ø exterior 15 mm - Ø interior 10 mm	20 pièces (emballées individuellement) 20 uds. (envasado individualmente)
720041 stérile estéril	Pièce à main et adaptateur, sans tube	25 pièces (emballées individuellement) 25 uds. (envasado individualmente)
720941 non stérile no estéril	Mango y adaptador, sin tubo	En pack individuel, commande min. 25 pièces Producto a granel, pedido mín. 25 uds.

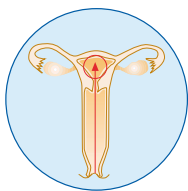

720133 - 720041: usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051
720134 - 720941: usage unique - non stérile - marqué CE
Sur demande, il est disponible avec un tuyau de 3 mètres (code 720143)

720133 - 720041: desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051
720134 - 720941: desechable - no estéril - marcado CE
Bajo solicitud, está disponible con tubo de 3 metros (código 720143)