


Softinjector


Injecteurs utérins pour hystérosalpingographie
Inyectores uterinos para histerosalpingografía

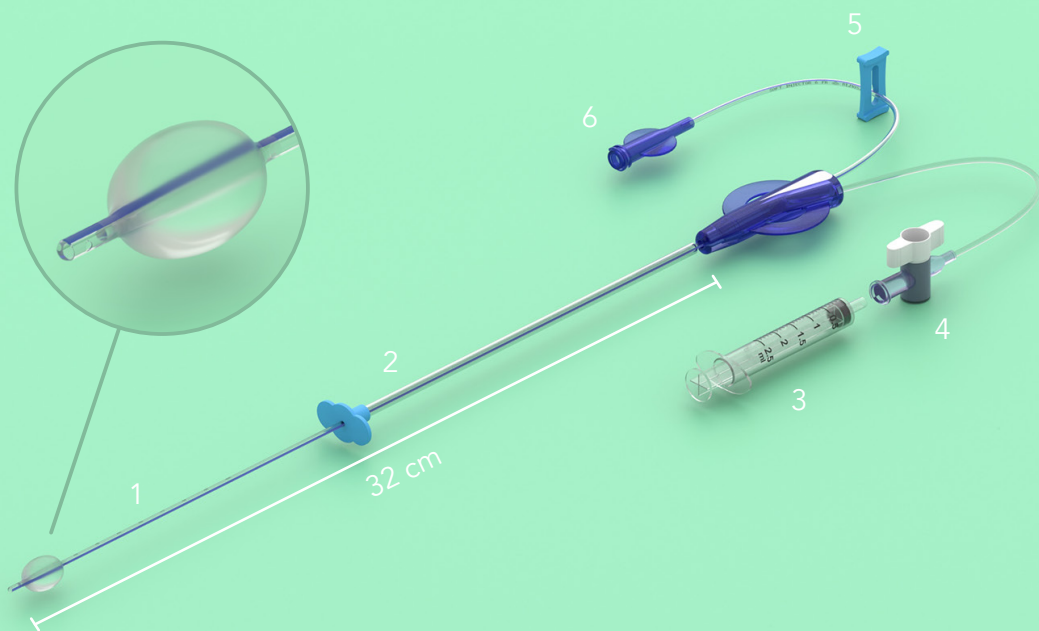

-  Pour l'injection de produit de contraste (radio-opaque / bleu de méthylène) dans les procédures d'hystérosalpingographie. Ils se composent de:
- un introducteur rigide équipé d'une butée coulissante (2);
 - un cathéter souple radio-opaque à 2 lumières (1) équipé d'un ballon ovale en caoutchouc thermoplastique de 2,5 cc sur la partie distale qui assure un logement stable du cathéter;
 - robinet (4) pour régler le gonflage du ballon;
 - collier de serrage pour éviter le reflux de liquide (5);
 - un connecteur Luer Lock femelle (6) pour l'injection du produit de contraste;
 - une seringue de 2,5 cc (3).

-  Para la inyección de medios de contraste (radiopaco / azul de metileno) en los procedimientos de histerosalpingografía. Incluyen:
- un introductor rígido con un aplicador ajustable (2);
 - un catéter blando radiopaco de 2 conductos (1) con un balón ovalado de goma termoplástica de 2,5 cc en la parte distal que garantiza un posicionamiento estable del catéter;
 - una válvula (4) para regular el inflado del balón;
 - una abrazadera para evitar el reflujo del líquido (5);
 - un conector luer lock hembra (6) para la inyección del medio de contraste;
 - una jeringa de 2,5 cc (3).

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720240	Ø extérieur 1,67 mm (5 Fr) Ø exterior 1.67 mm (5 Fr)	10 pièces/uds.
720226	Ø extérieur 2 mm (6 Fr) Ø exterior 2 mm (6 Fr)	
720250	Ø extérieur 2,33 mm (7 Fr) Ø exterior 2.33 mm (7 Fr)	

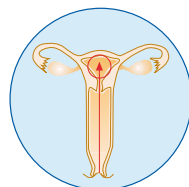

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051