


Transfer Easy

Cathéter pour un transfert
«facile» d'embryon

*Catéter para la transferencia
"fácil" de embriones*

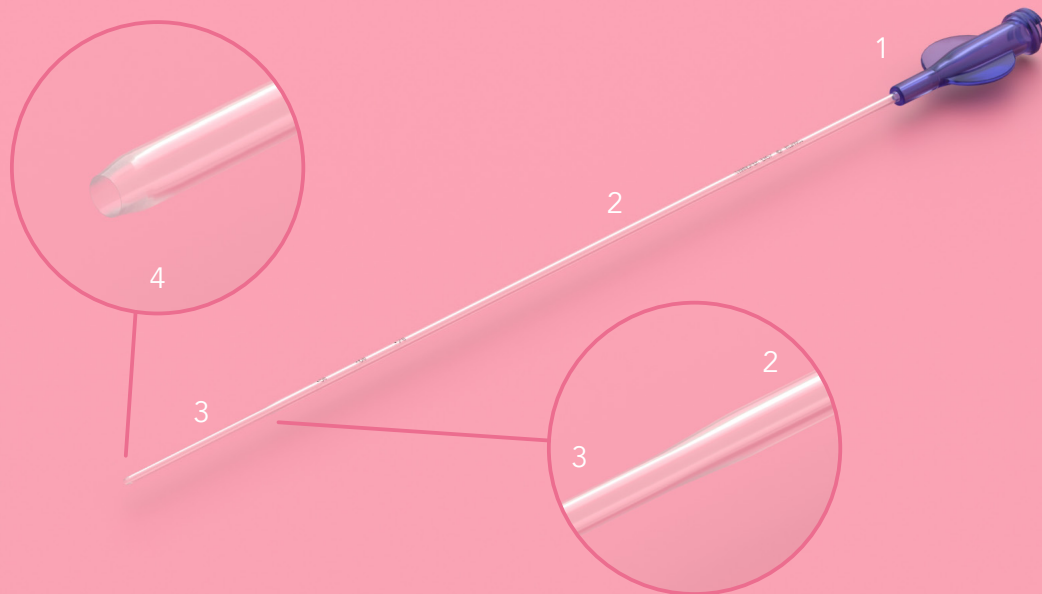

 Indiqué en présence d'un canal cervical à perméabilité normale.

Le cathéter se compose de:

- une partie proximale rigide (2);
- une partie distale souple et flexible (3) avec une pointe effilée échoguidée.

Marquage sur le cathéter à 5, 6 et 7 cm de l'extrémité distale pour un positionnement correct dans la cavité utérine.

Pointe radio-opaque conique (4).

Un raccord Luer Lock (1) sert de poignée et permet une fixation sûre à la seringue.

 Indicado en presencia de un canal cervical con permeabilidad normal.

El catéter está compuesto por:

- una parte proximal rígida (2);
- una porción distal blanda y flexible (3) con una punta cónica ecoguiada.

Marcado en el catéter a 5, 6 y 7 cm del extremo distal para su correcto posicionamiento en la cavidad uterina.

Punta cónica radiopaca (4).

Un conector luer lock (1) actúa como empuñadura y permite una conexión segura a la jeringa.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770116	Ø Extrémité proximale : Ø extérieur 2 mm Ø Extrémité distale : Ø extérieur 1,5 mm Longueur 200 mm Ø Extremo proximal: Ø exterior 2 mm Ø Extremo distal: Ø exterior 1,5 mm Longitud 200 mm	12 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

