


Transfer Omni-L

Cathéter pour transfert «difficiles» d'embryons

Catéter para la transferencia "difícil" de embriones

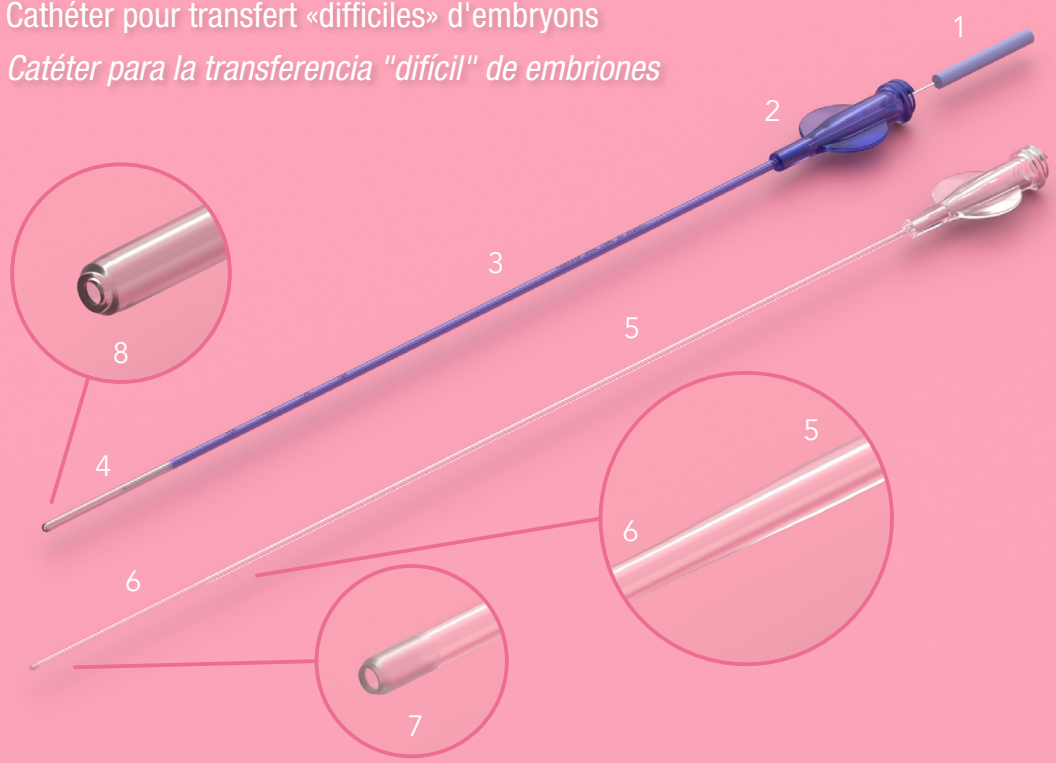

Indiqué en présence de col sténosé grâce au mandrin en acier malléable.
Le set se compose de:


- un cathéter introducteur bleu (3) avec une échelle de mesure à 5,6,7,8 cm de la pointe;
- extrémité distale transparente et souple (4) avec pointe conique (8).
- mandrin (1) qui permet de plier le cathéter à volonté;
- raccord luer lock qui fait office de poignée (2);
- un cathéter de transfert d'embryon avec une partie proximale rigide (5), et une partie distale souple (6) avec pointe conique radio-opaque (7).



Indicado en presencia de un cuello uterinoestenótico gracias al émbolo de acero maleable.
El set está compuesto por:

- un catéter introductor azul celeste (3) con una escala de medición a 5,6,7,8 cm de la punta;
- extremo distal transparente y blando (4) con punta cónica (8).
- émbolo (1) que permite doblar la sonda a voluntad;
- conector luer lock que actúa como empuñadura (2);
- un catéter de transferencia embrionaria con una parte proximal rígida (5), una parte distal blanda (6) con una punta cónica radiopaca (7).

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770406	Cathéter introducteur: Ø extérieur 2 mm - Longueur 200 mm Cathéter de transfert: Ø extérieur 1 mm - Longueur 250 mm Catéter introductor: Ø exterior 2 mm - Longitud 200 mm Catéter de transferencia: Ø exterior 1 mm - Longitud 250 mm	12 pièces/uds.

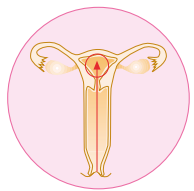

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051