


Ainseblue

Cannula di Inseminazione Intra Uterina
con estremità distale flessibile

*Intrauterine insemination catheter
with flexible distal tip*



 Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di IA.

Cannula trasparente e radiopaca con due diversi gradi di flessibilità:


- una porzione prossimale rigida (2) per un facile inserimento attraverso la cervice;
- una porzione distale morbida e flessibile (3) per un trasferimento seminale delicato e atraumatico;
- 2 fori laterali in punta che permettono una distribuzione ottimale del liquido seminale.

Scala di misurazione (50-60-70 mm)* sulla cannula.

Un raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e permette una connessione sicura con la siringa.

Le due alette laterali (2) allineate con i 2 fori sulla punta riflettono l'orientamento durante il posizionamento.

* Fornisce una misura approssimativa.

 For easy transfer of washed sperm into the uterine cavity, in AI procedures.

Single lumen, radiopaque transparent catheter with differentiated stiffness:

- rigid proximal portion (2) for easy insertion through the cervix;
- flexible, soft, distal tip (3), for atraumatic and gentle seminal transfer;
- double side-eyes allow an excellent distribution of the seminal fluid.


Centimeter-marking catheter (50-60-70 mm)*.

A luer lock adapter (1) serves as finger grip and allows a safe syringe connection.

The two orientation wings aligned with the double side-eyes placed on the distal tip, enhance accurate placement of the catheter.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770113	<p>Ø esterno 2 mm Ø interno 1,3 mm Lunghezza 174 mm</p> <p>O.D 2 mm - I.D 1.3 mm Length 174 mm</p>	24 pz./pcs.

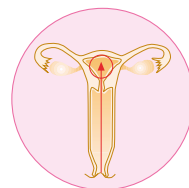

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked