

Ainsegrey

Cannula di Inseminazione Intra Uterina
Intrauterine insemination catheter




 Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina nelle procedure di IA. La cannula morbida centimetrata* (3) ha la punta arrotondata (4) con due fori laterali e un mandrino in acciaio (1) per un inserimento facilitato. Il raccordo luer lock funge da impugnatura e permette la connessione sicura alla siringa. Le due alette laterali (2), allineate con i 2 fori sulla punta, riflettono l'orientamento durante il posizionamento. Non utilizzare per procedure di trasferimento embrioni.

* Fornisce una misura approssimativa.

 For easy sperm transfer into the uterine cavity, in Artificial Insemination procedures. Centimeter-marked* soft catheter (3) with rounded tip (4), two side ports and a steel mandrel (1) to facilitate insertion. A luer lock adapter serves as finger grip and allows a safe syringe connection. The two orientation wings (2), aligned with the two side ports, indicate the orientation when placing the catheter. Not intended for in vitro fertilization and Intra Fallopian tubes procedures.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770220	Ø esterno 2 mm Ø interno 1,2 mm Lunghezza 195 mm O.D 2 mm - I.D 1.2 mm Length 195 mm	24 pz./pcs.

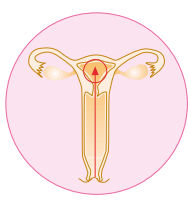

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked