




Monolume

Ago per prelievo ovociti e aspirazione cisti ovariche

Needle for oocyte/ovarian cyst aspiration

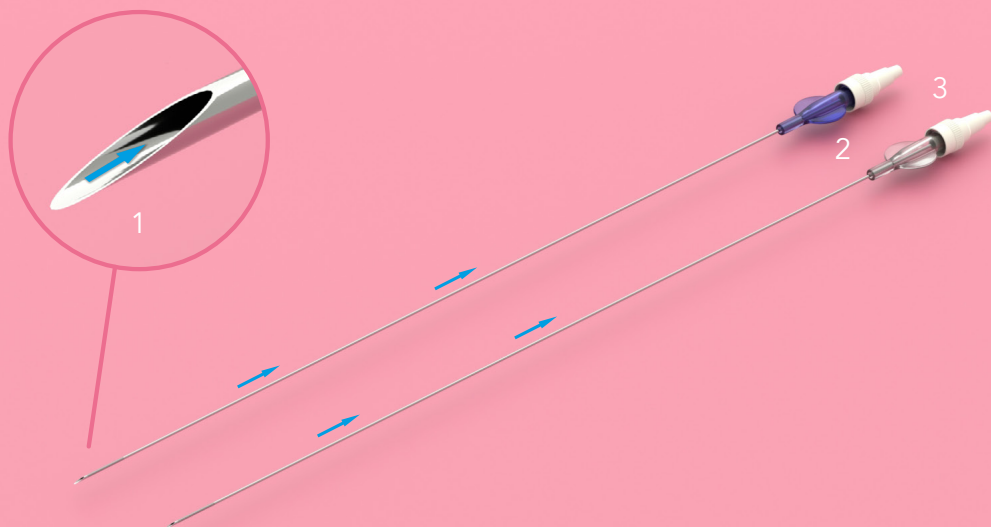

-  Ago semplice a lume singolo composto da:
 - punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
 - un raccordo luer lock (2) che funge da impugnatura e permette una connessione sicura alla siringa;
 - due alette laterali in linea con l'affilatura della punta che permettono l'orientamento durante la fase di penetrazione;
 - raccordo universale (3) che consente molteplici connessioni.

-  Single lumen needle composed by:
 - echogenic tip with atraumatic bevel (1);
 - a luer lock adapter (2) that serves as finger grip and allows a safe syringe connection;
 - two orientation wings aligned with tip bevel aiding the operator during penetration phase;
 - universal adapter (3) allowing multiple connections.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770312	Luer Lock Azzurro Light Blue Luer Lock	16 G x 330 mm	10 pz./pcs.
770311	Luer Lock Trasparente Transparent Luer Lock	17 G x 330 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

