



Transfer Easy

Catetere per trasferimento "facile"
di embrioni

*Embryo transfer catheter for
"easy" transfer*

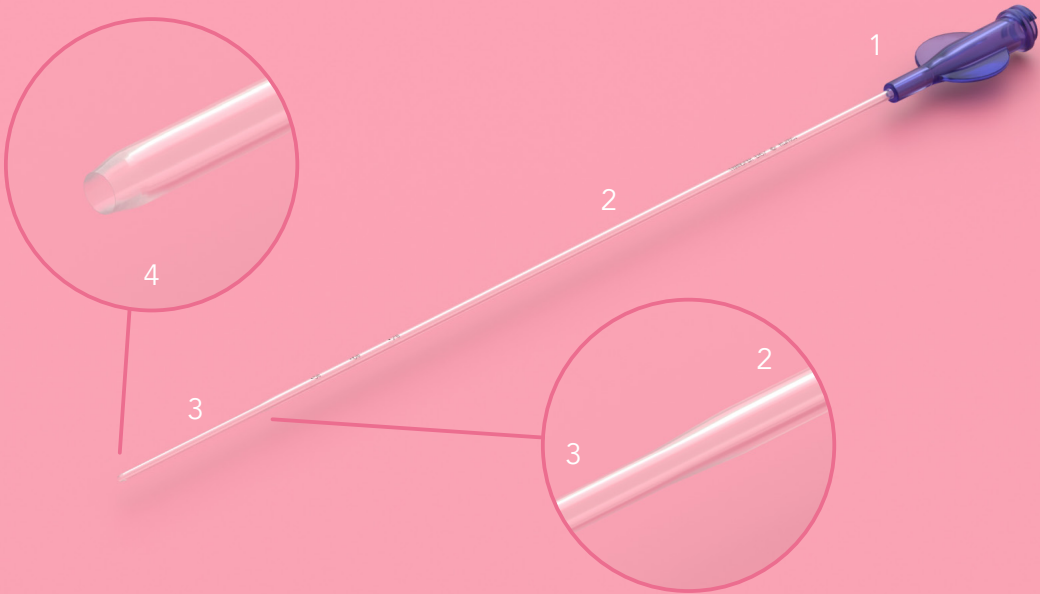

 Indicato in presenza di canale cervicale con permeabilità normale.

Il catetere è composto da:

- una porzione prossimale rigida (2);
- una porzione distale morbida e flessibile (3) con punta rastremata ecoguidata.

Marcatura sul catetere a 5, 6 e 7 cm dall'estremità distale per un corretto posizionamento nella cavità uterina.

Punta rastremata radiopaca (4).

Un raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e permette un attacco sicuro alla siringa.

 Recommended when permeability of the cervical canal is considered normal.

The catheter is composed by:

- a rigid proximal portion (2);
- a soft and flexible distal portion (3), with tapered echogenic tip.

Marking at 5, 6 and 7 cm from distal portion aids correct placement into the uterine cavity.

Tapered radiopaque tip (4).

A luer lock connector (1) acts as finger grip and allows a safe syringe connection.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770116	<p>Ø Estremità prossimale: Ø esterno 2 mm Ø Estremità distale: Ø esterno 1,5 mm Lunghezza 200 mm</p> <p>Ø Proximal portion: O.D. 2 mm Ø Distal portion: O.D. 1.5 mm Length 200 mm</p>	12 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

