



# Transfer Omni-S

Catetere per trasferimento "difficile" di embrioni


*Embryo transfer catheter for "difficult" transfer*

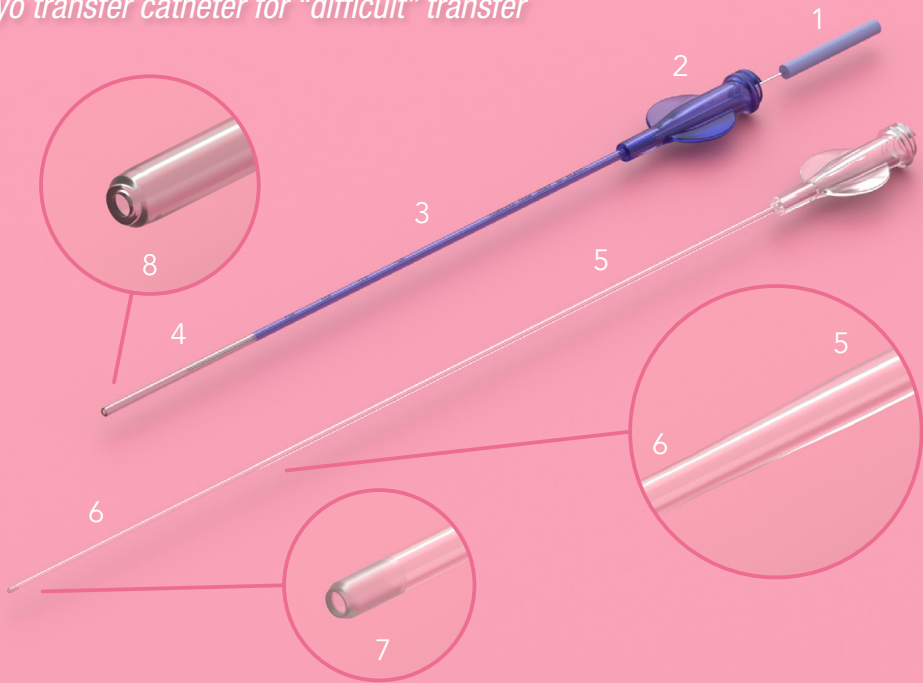

 Indicato in presenza di collo dell'utero stenotico grazie al mandrino in acciaio malleabile.

Il set è composto da:


- un catetere introduttore azzurro (3) con scala di misurazione a 5,6,7,8 cm dalla punta;
- estremità distale trasparente e morbida (4) con punta rastremata (8).
- mandrino (1) che permette di curvare il catetere a piacimento;
- raccordo luer lock che funge da impugnatura (2);
- un catetere di trasferimento embrioni con una porzione prossimale rigida (5), una porzione distale morbida (6) con punta rastremata radiopaca (7).

 Recommended in case of cervical stenosis thanks to malleable stainless-steel mandrel.

The embryo transfer set is composed by:

- a light blue colored outer introducer (3) with graduated markings placed at 5-6-7-8 cm from the tip;
- soft and clear distal tip (4) is tapered (8).
- a mandrel that allows catheter shaping once it is inserted (1);
- a luer lock connector that serves as finger grip (2);
- an embryo transfer catheter composed by a rigid proximal portion (5), a soft distal portion (6) with a tapered radiopaque tip (7).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770407	<p>Catetere introduttore: Ø esterno 2 mm - Lunghezza 140 mm</p> <p>Catetere trasferitore: Ø esterno 1 mm - Lunghezza 210 mm</p> <p>Introducer catheter: O.D. 2 mm - Length 140 mm</p> <p>Transfer catheter: O.D. 1 mm - Length 210 mm</p>	12 pz./pcs.

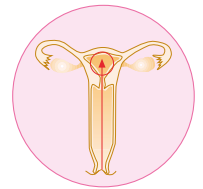

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked