



# **METRASTOP**

## **Post-partum Balloon**



**PRODOTTO ITALIANO**



**RI.MOS.**

*Disposable Medical Products*

# METRASTOP

## Post-partum Balloon

UNA NUOVA SOLUZIONE  
PER IL TRATTAMENTO DELLE  
EMORRAGIE UTERINE POST-PARTUM



**Doppio pallone molto leggero = comfort per la paziente**

(liquido → pallone esterno / aria → pallone interno).

Il pallone rimane in sede, **evita il rischio di slittamento.**

Procedura di **gonfiaggio molto veloce.**


Possibilità di **riposizionare il catetere** in caso di mal posizionamento.

# Info Ordine

Rev. Gennaio 2018



**Pallone esterno** da gonfiare con 60 ml di soluzione salina sterile (siringa inclusa).

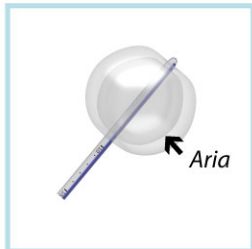

**Pallone interno** da gonfiare con max 420 cc di aria (circa 7 pompate).

Codice	Descrizione	Fr	Lunghezza
720264	Scatola da 2 pz Confezione singola monouso* Sterilizzato ETO, marcato CE	24.0	54 cm

\*Include una siringa da 60 ml e una sacca di drenaggio per monitorare l'emostasi.



Per informazioni più dettagliate sull'uso, le precauzioni, le avvertenze e le controindicazioni del prodotto consultate il sito **www.rimos.com** e le istruzioni per l'uso complete.

COD. 740226




**RIMOS.**  
Disposable  
Medical Products

41037 Mirandola (Mo) - ITALY  
Tel: 0535/25755 - Fax 0535/25509  
info@rimos.com - www.rimos.com

Azienda Certificata



UNI CEI EN ISO  
13485:2012

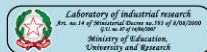

Dispositivo medico  
classe IIa

CE 0476