


# Cerviram

Dispositivo per prelievo endometriale per  
esame citologico

*Endometrial sampler for cytologic screening*

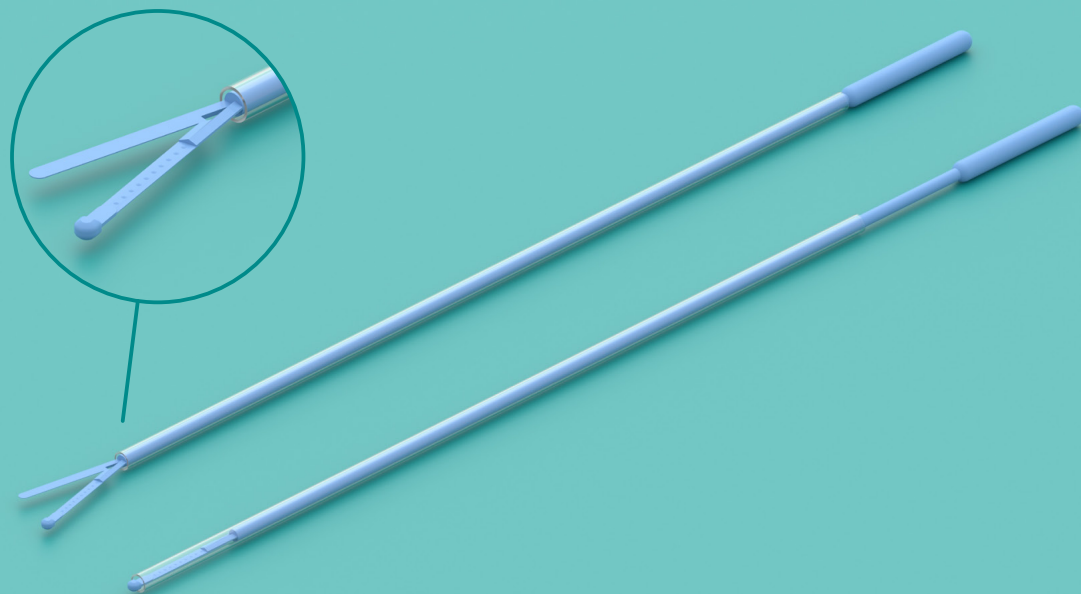


 Per un prelievo citologico dell'endometrio sicuro e indolore.

Le protuberanze sulla punta biforcuta asimmetrica consentono un prelievo accurato ed atraumatico del tessuto uterino.

La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

 For a painless and safe screening of the endometrium. The protrusions on the asymmetrical forked tip allow an accurate and atraumatic sampling of the uterine tissue. The outer sheath slides on the mandrel to facilitate insertion with closed tip.

Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720113	Lunghezza 26 cm - Ø esterno 3,5 mm Length 26 cm - O.D 3.5 mm	150 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

