


Endoram

Dispositivo per biopsia endometriale per esame istologico

Device for endometrial biopsy for hystologic screening

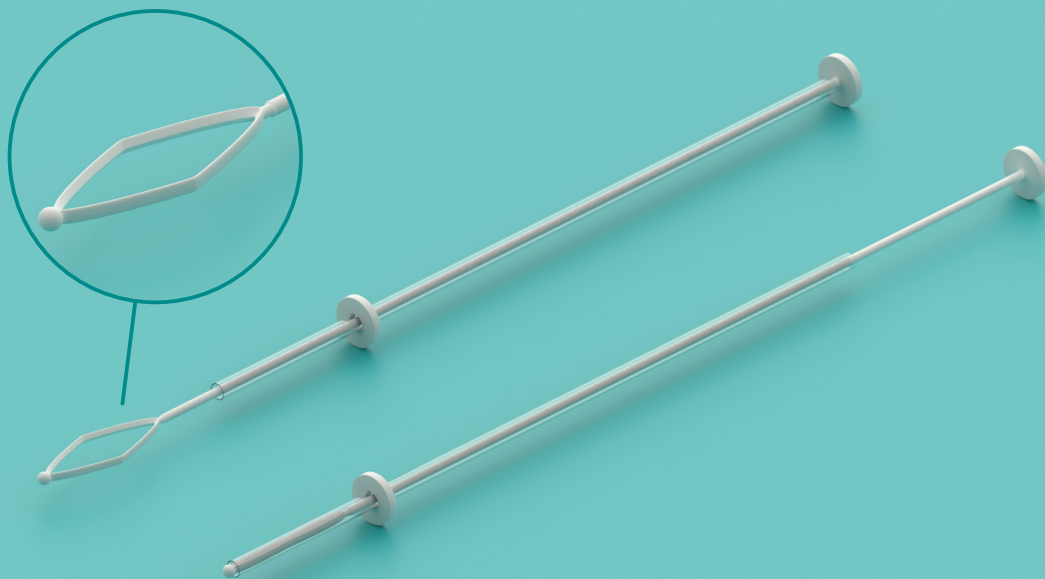


 Per un prelievo biptico dell'endometrio sicuro e indolore.

La punta a forma romboidale con bordi affilati consente un prelievo biptico delle pareti uterine.

La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa.

Il fermo scorrevole è posto sulla guaina esterna per determinare la corretta profondità di inserimento.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

 For a painless and safe endometrial biptic sampling. The rhomboidal shaped tip with sharp profile allows biopsy sampling of the uterine walls.

The outer sheath slides on the mandrel to facilitate insertion with closed tip.

An adjustable positioner is set on the outer sheath to determine the correct insertion depth.

Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720112	Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3,8 mm Length 25 cm - O.D 3.8 mm	100 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

