

Kiwi OmniCup Tfi®

Dispositivo per parto
vuoto-assistito con
Indicatore Forza di
Trazione

*Vacuum assisted fetal
delivery device with
Traction Force Indicator*



 Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita durante il parto.


Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto e indicatore della forza di trazione: la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato e completo all'operatore, non impegnando il resto del personale in sala parto.

La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un ergonomico tirante a maniglia.

KIWI OMNICUP TFI® è particolarmente indicato per posizioni fetali laterali sfavorevoli, per presentazioni occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta ha un basso profilo in modo da essere correttamente posizionata sul punto di flessione della testa del feto stesso.

KIWI OMNICUP TFI® è inoltre indicato per l'addestramento del personale ad eseguire parti vuoto-assistiti grazie all'indicatore della forza di trazione che visualizza la forza applicata sulla testa del feto.

 FOR ITALIAN MARKET ONLY

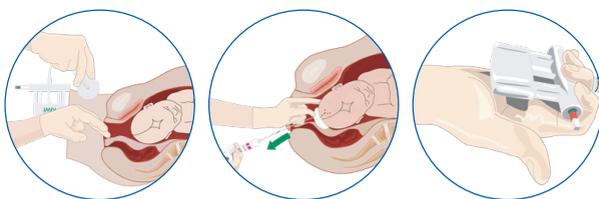

Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000MTE	5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

