




ERGO-RAM

Aguja descartable para aspiración medular con mango ergonómico.
Bone Marrow Aspiration Needle with ergonomic handle.

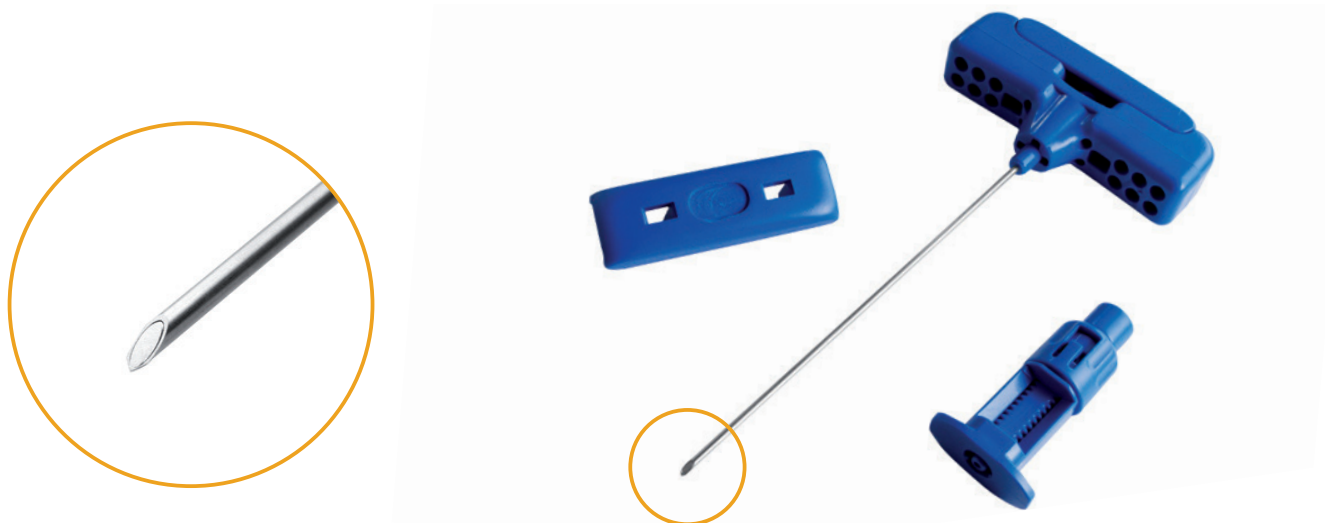

 Aguja descartable de aspiración medular con mango ergonómico. La punta de la cánula es espinal de corte triple para facilitar una penetración atraumática. El mango ergonómico, dibujado por una toma fácil y fuerte de la aguja, asegura un alto nivel de precisión durante todo el procedimiento. Una escala milimetrada puesta en el mango en plástico permite de visualizar de forma simple y práctica el grado de profundidad que se quiere alcanzar. La conexión universal luer lock permite el uso de cualquier tipo de jeringa disponible en el mercado.


 Bone Marrow Aspiration Needle with Adjustable Needle Stop and ergonomic handle. The spinal triple sharpened tip allows a non traumatic, fast and easy penetration into the bone marrow cavity. The adjustable needle stop controls with precision the depth of the penetration allowing the aspiration from both the sternum and the iliac crest. It can be removed if aspirating at the iliac crest. The Luer Lock cone allows the secure connection with all syringes available on the market.

Códigos disponibles
Available codes

	70 mm
15G	EG1507

MOQ: 100 piezas
MOQ: 100 pcs

Cada producto está confeccionado individualmente. Caja de 5 piezas. Esterilizado por óxido de etileno. Marcado CE.
Every product is single packed in a 5 pcs box. ETO sterilized. CE marked.

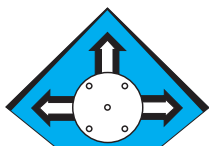

RI.MOS. s.r.l.
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. +39 0535 25755
Fax +39 0535 25509
www.rimos.com - info@rimos.com

AGORAM®